


making a difference

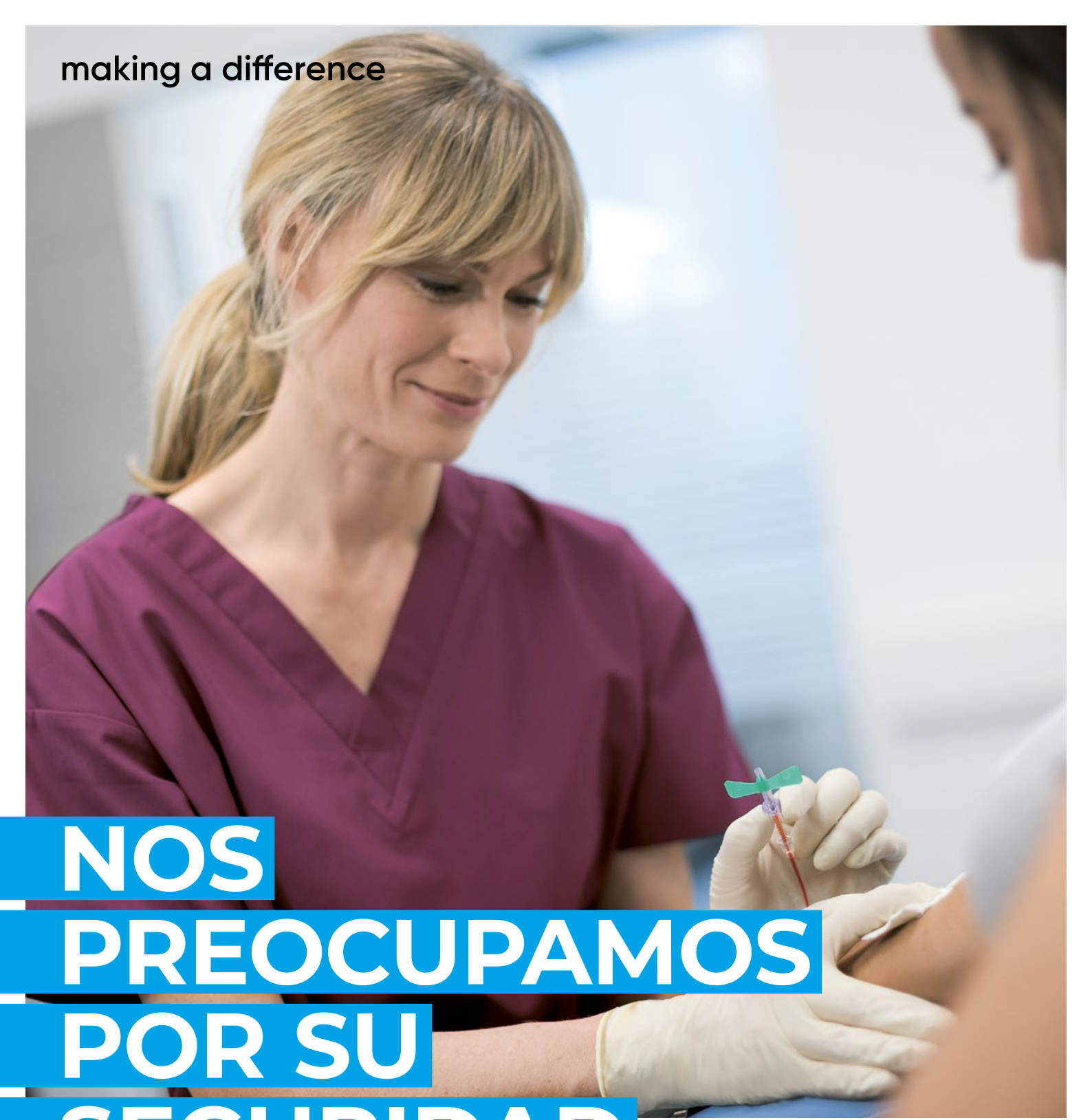

**NOS
PREOCUPAMOS
POR SU
SEGURIDAD**

VACUETTE®

Productos de seguridad

Greiner Bio-One dispone de una amplia gama de productos de seguridad para diferentes necesidades.



greiner
BIO-ONE

Las consecuencias de una lesión causada por incidentes con productos de punción pueden tener efectos a largo plazo en la situación profesional y personal de la persona afectada y su familia.



Una de las formas más eficaces de protegerse es utilizar productos de seguridad.

LAS LESIONES CAUSADAS POR PUNCIONES ACCIDENTALES SON COSA DEL PASADO

Gran parte de las enfermedades infecciosas contraídas en el trabajo en el sector sanitario se pueden atribuir a lesiones por punción. Las lesiones causadas por incidentes con productos de punción suponen, con diferencia, el mayor riesgo de infección.

Más del 50 % de todos los casos registrados afectan al personal de enfermería, seguidos de los médicos y del personal de laboratorio.

Sin embargo, esto no significa que las lesiones ocasionadas por pinchazos con agujas sean un riesgo profesional inevitable. El uso correcto de los productos de seguridad VACUETTE® puede ayudar a reducir significativamente este riesgo.

Los productos de seguridad VACUETTE® cumplen con los requerimientos de la Directiva de la UE 2010/32.

NOS PREOCUPAMOS POR SU SEGURIDAD.

- / Amplia gama de productos de seguridad.
- / Diferentes productos en función de la aplicación.
- / El producto de seguridad más adecuado para cada situación.

EL PRODUCTO DE SEGURIDAD ADECUADO PARA CADA SITUACIÓN

Ofrecemos una amplia gama de productos de seguridad que permiten elegir los productos más adecuados para cada sector y cada usuario. En Greiner Bio-One ponemos a su disposición, productos que van desde dispositivos de seguridad básica,

hasta nuestros productos de seguridad premium.

En las siguientes páginas encontrará una gran variedad de productos que le protegerán de la mejor manera frente a lesiones causadas por punción con agujas.

SEGURIDAD A TODOS LOS NIVELES

y para cada necesidad

PRODUCTOS DE GREINER BIO-ONE

En nuestra gama de productos encontrará el producto adecuado para cada nivel de seguridad. Desde productos sin mecanismo de seguridad hasta productos de seguridad premium, tenemos el producto adecuado en función de sus necesidades.



Obtención diaria de muestras sanguíneas.

Recomendamos utilizar VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS para la toma diaria de muestras sanguíneas.

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS



Venas difíciles

Todos nuestros sets de seguridad para obtención de muestras sanguíneas son adecuados también para pacientes con venas difíciles. Nuestro producto premium VACUETTE® EVOPROTECT garantiza una toma de muestras de sangre especialmente delicada.


VACUETTE® EVOPROTECT o Palomilla de seguridad para la toma de muestra sanguínea



Hemocultivos.

En el caso de las tomas de muestras sanguíneas para hemocultivo, disponemos de un set de seguridad con el portatubos para hemocultivo premontado.

Palomilla de SEGURIDAD para toma de muestra sanguínea con portatubos para hemocultivo (21G o 23G)

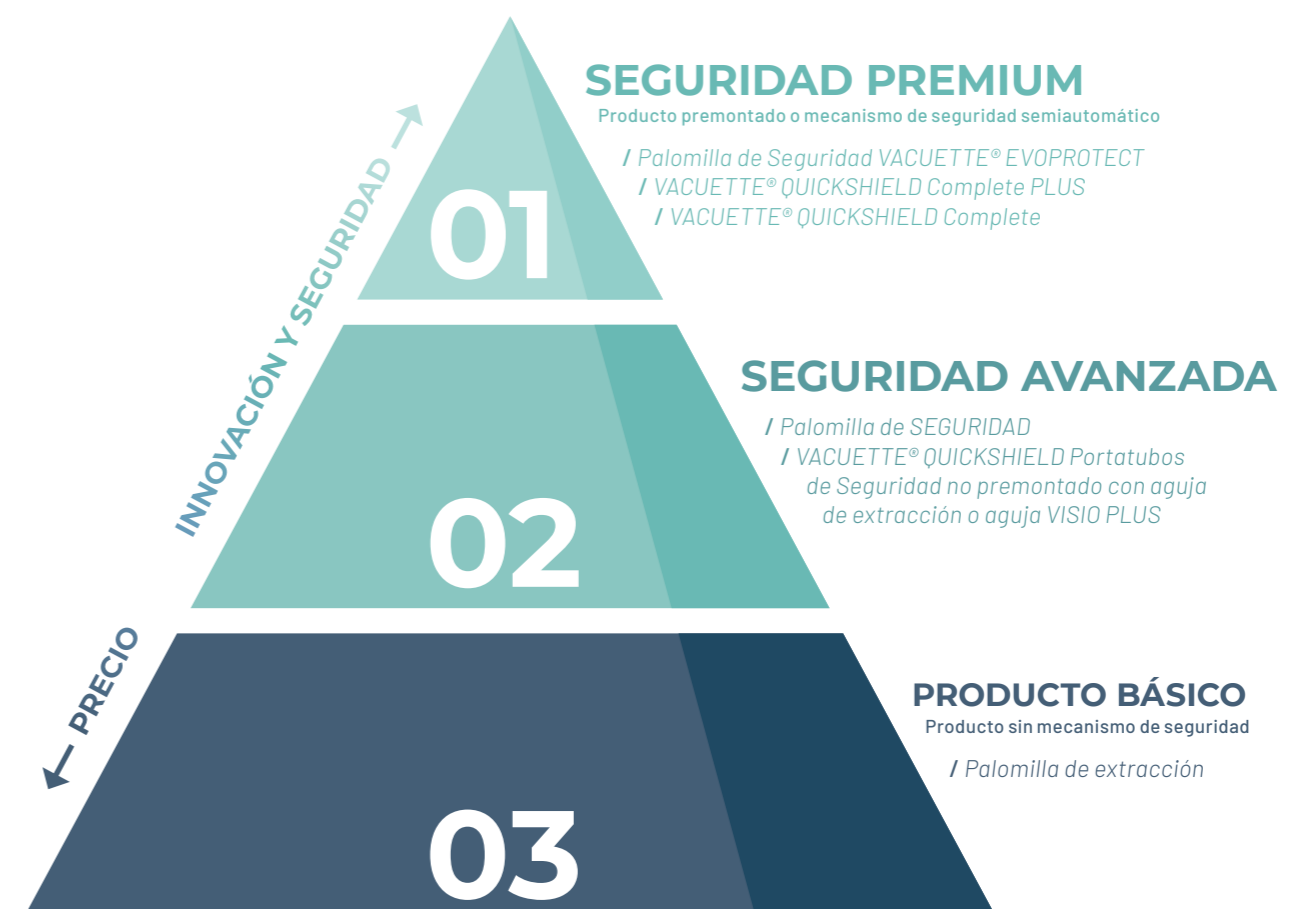

ENCUENTRE EL PRODUCTO DE SEGURIDAD ADECUADO DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA

En la siguiente tabla, puede tener una visión general de las características que ofrece el producto seleccionado y qué nivel de seguridad proporciona. Esto le permite tomar la mejor decisión posible en función de sus necesidades.

		Dispositivo de seguridad	Retracción semiautomática de la aguja	Activación en vena	Activación con una mano	Producto premontado	Ventana de visualización del flujo sanguíneo	La cubierta protectora se puede reposicionar	Toma de muestras sanguíneas e infusión con el mismo dispositivo	Aguja con paredes extrafinas (favorece el flujo sanguíneo)	Prácticamente sin efecto memoria	Exento de látex	Exento de DEHP
01	Palomilla de Seguridad VACUETTE® EVOPROTECT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓
	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete	✓			✓	✓		✓				✓	✓
02	Palomilla de SEGURIDAD	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	VACUETTE® QUICKSHIELD Portatubos con aguja VISIO PLUS (no premontado)	✓			✓		✓	✓				✓	✓
	VACUETTE® QUICKSHIELD Portatubos con aguja de extracción (no premontado)	✓			✓			✓				✓	✓
03	Palomilla de extracción					✓					✓	✓	
	Portatubos estándar con aguja						✓					✓	✓

* 216 y 236



Obtenga más información sobre nuestros productos de seguridad en: powerforsafety.com



Con los productos de seguridad se pueden evitar las lesiones causadas por punción con agujas. Protéjase.



Una cubierta protectora envuelve la aguja de forma segura después de la activación y protege de las lesiones causadas por punción con agujas.



PARA LA PRÁCTICA DIARIA EN LA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE

VACUETTE® QUICKSHIELD
Portatubos de seguridad

El diseño ergonómico del portatubos garantiza un buen agarre durante la punción.

NO IMPLICA NINGÚN CAMBIO EN LA TÉCNICA UTILIZADA HABITUALMENTE

El portatubos de seguridad VACUETTE® QUICKSHIELD de Greiner Bio-One puede utilizarse tanto con las agujas de extracción VACUETTE®, como con las agujas VACUETTE® VISIO PLUS. En VACUETTE® QUICKSHIELD Complete y VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS, las agujas se encuentran premontadas.


La cubierta protectora está unida directamente al portatubos. Este producto, que puede

activarse con una sola mano con la ayuda de una superficie sólida o con el pulgar, destaca por su facilidad de uso y su protección eficaz frente a las lesiones y las infecciones.

El portatubos de seguridad VACUETTE® QUICKSHIELD ofrece protección frente a lesiones por punción con agujas sin implicar ningún cambio en la técnica de obtención de muestras sanguíneas habitual.

CUBIERTA PROTECTORA PARA UNA MAYOR SEGURIDAD.

- / No implica ningún cambio en la técnica utilizada habitualmente.
- / Mayor flexibilidad con respecto a las necesidades particulares del usuario y del paciente gracias a su cubierta de protectora, que puede posicionarse en cualquier dirección.
- / La activación de la cubierta de seguridad se indica mediante un clic audible y táctil.

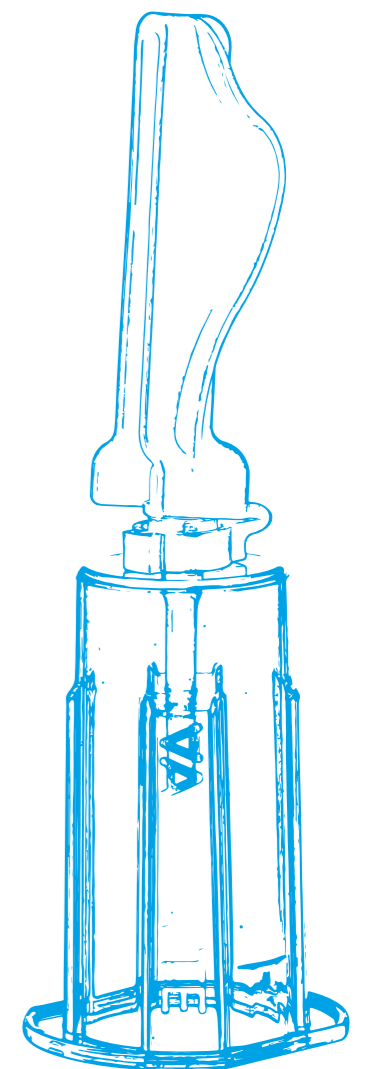

**AHORRE
TIEMPO**

con la aguja
VISIO PLUS
premontada


PRODUCTO COMBINADO

PORTATUBOS VACUETTE® QUICKSHIELD PREMONTADO CON AGUJA

En este producto combinado con aguja premontada, el portatubos de seguridad viene envasado individualmente en un blíster estéril.

La cubierta de seguridad puede posicionarse en cualquier dirección

VACUETTE® QUICKSHIELD
Portatubos de seguridad

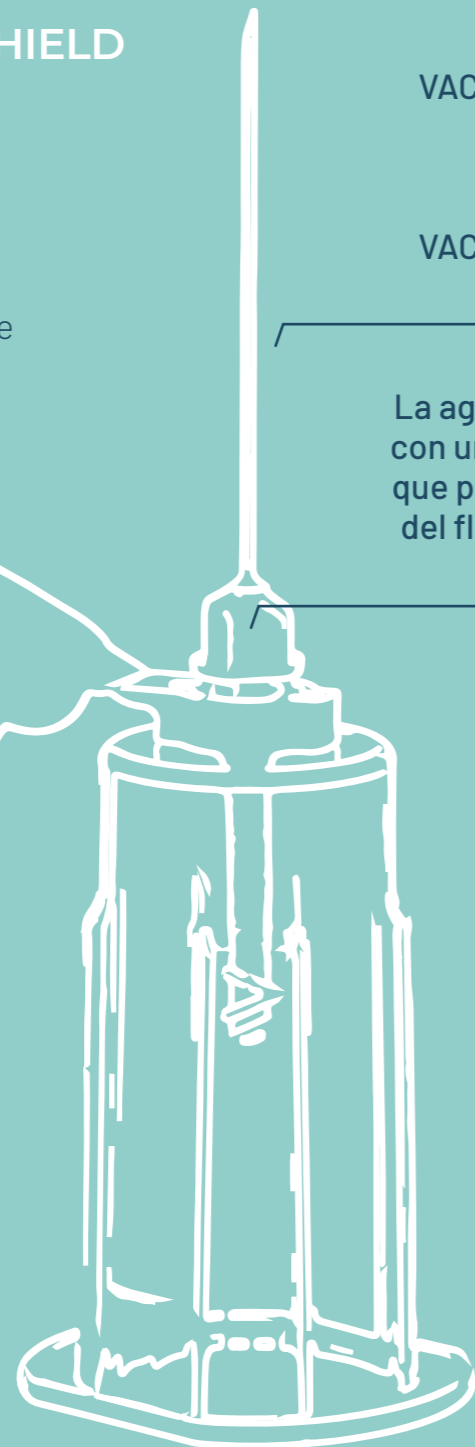

ya sea:
VACUETTE® QUICKSHIELD
Complete*

o bien:
VACUETTE® QUICKSHIELD
Complete PLUS**

La aguja VISIO PLUS cuenta con un cuerpo transparente que permite la visualización del flujo sanguíneo durante la venopunción

* premontado con aguja de extracción VACUETTE®

** premontado con aguja VACUETTE® VISIO PLUS

CONSULTE LAS
INSTRUCCIONES
DE USO

en www.gbo.com

ACTIVACIÓN DEL MECANISMO DE SEGURIDAD

Opción 1



Opción 2



1

Active el mecanismo de seguridad **sobre una superficie sólida o con el pulgar.**

2

Se oirá un **clik** cuando la cubierta se active de forma segura.



SEGURIDAD MEJORADA

Una vez que la cubierta de seguridad está activada, la aguja queda encerrada de forma segura e irreversible.

La Palomilla de SEGURIDAD proporciona al paciente un mayor confort durante la obtención de muestras sanguíneas.



CUBRIMOS SUS NECESIDADES PARA UNA GRAN VARIEDAD DE TIPOS DE VENAS

PALOMILLA
de SEGURIDAD

Este producto ergonómico está envasado individualmente. Su envase es fácil de abrir y genera pocos residuos.

ALTO NIVEL DE SEGURIDAD


Este producto proporciona un alto nivel de seguridad, ya que el mecanismo de seguridad se activa mientras la aguja está todavía dentro de la vena. La activación correcta del mecanismo de seguridad por parte del usuario se indica mediante un clic claramente audible. La palomilla de seguridad proporciona la mejor protección posible frente a las lesiones por punción con agujas. El cuerpo transparente permite comprobar si la vena se ha canalizado correctamente.

La palomilla se puede utilizar para la obtención de muestras sanguíneas o para la infusión durante un periodo de hasta cuatro horas.*

La palomilla de seguridad consta de una aguja estéril de un solo uso con aletas conectada a un tubo flexible, con o sin adaptador Luer, o un adaptador Luer con un portatubos.

DISEÑO SENCILLO.

- / El cuerpo transparente permite comprobar si la vena se ha canalizado correctamente.
- / Los tubos de diferentes longitudes ofrecen más flexibilidad en la obtención de muestras sanguíneas.
- / Activación sencilla del mecanismo de seguridad.

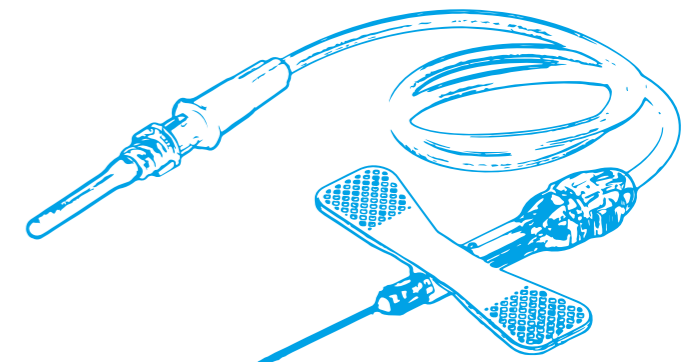

USO VERSÁTIL

para la obtención de muestras sanguíneas o para infusión*
(hasta cuatro horas)

CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE USO

en www.gbo.com

CUATRO VERSIONES DEL PRODUCTO


PALOMILLA DE SEGURIDAD

Como un práctico producto combinado, puede elegir la palomilla de SEGURIDAD como equipo de infusión, premontado con un adaptador Luer o un portatubos o con un portatubos para hemocultivo en varios tamaños de aguja y longitudes de tubo.

Los tubos de diferentes longitudes ofrecen más flexibilidad en la obtención de muestras sanguíneas

El cuerpo transparente entre la aguja y el tubo permite visualizar si la vena se ha canalizado correctamente

Productos premontados en blíster estéril

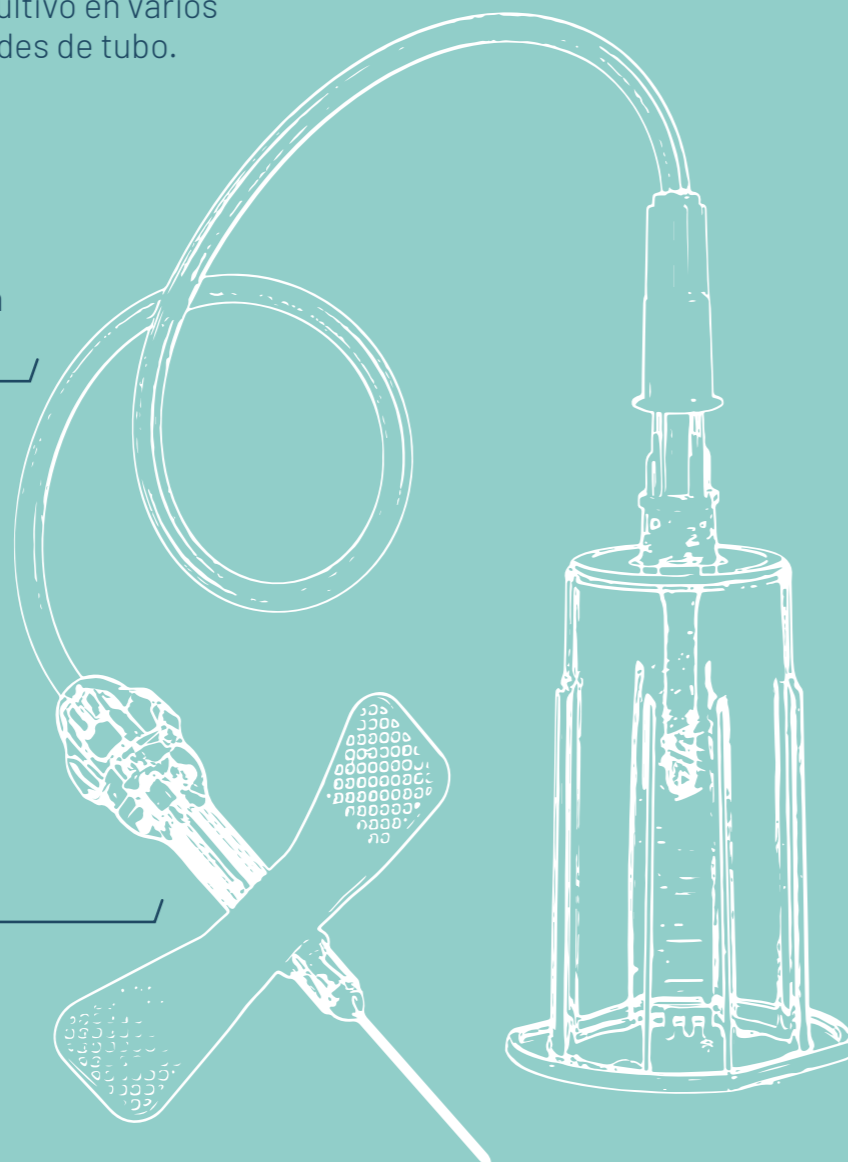

FÁCIL ACTIVACIÓN DEL MECANISMO DE SEGURIDAD



1

Active el mecanismo de seguridad **presionando ligeramente a ambos lados del cuerpo del dispositivo.**



2


A continuación, **tire hacia atrás de la pieza del cuerpo del dispositivo.** Un **clic audible** indica la correcta activación del sistema.



SEGURIDAD MEJORADA

La aguja queda encerrada de forma segura e irreversible para una máxima seguridad.

El siguiente nivel de seguridad
para la toma de muestras
sanguíneas.

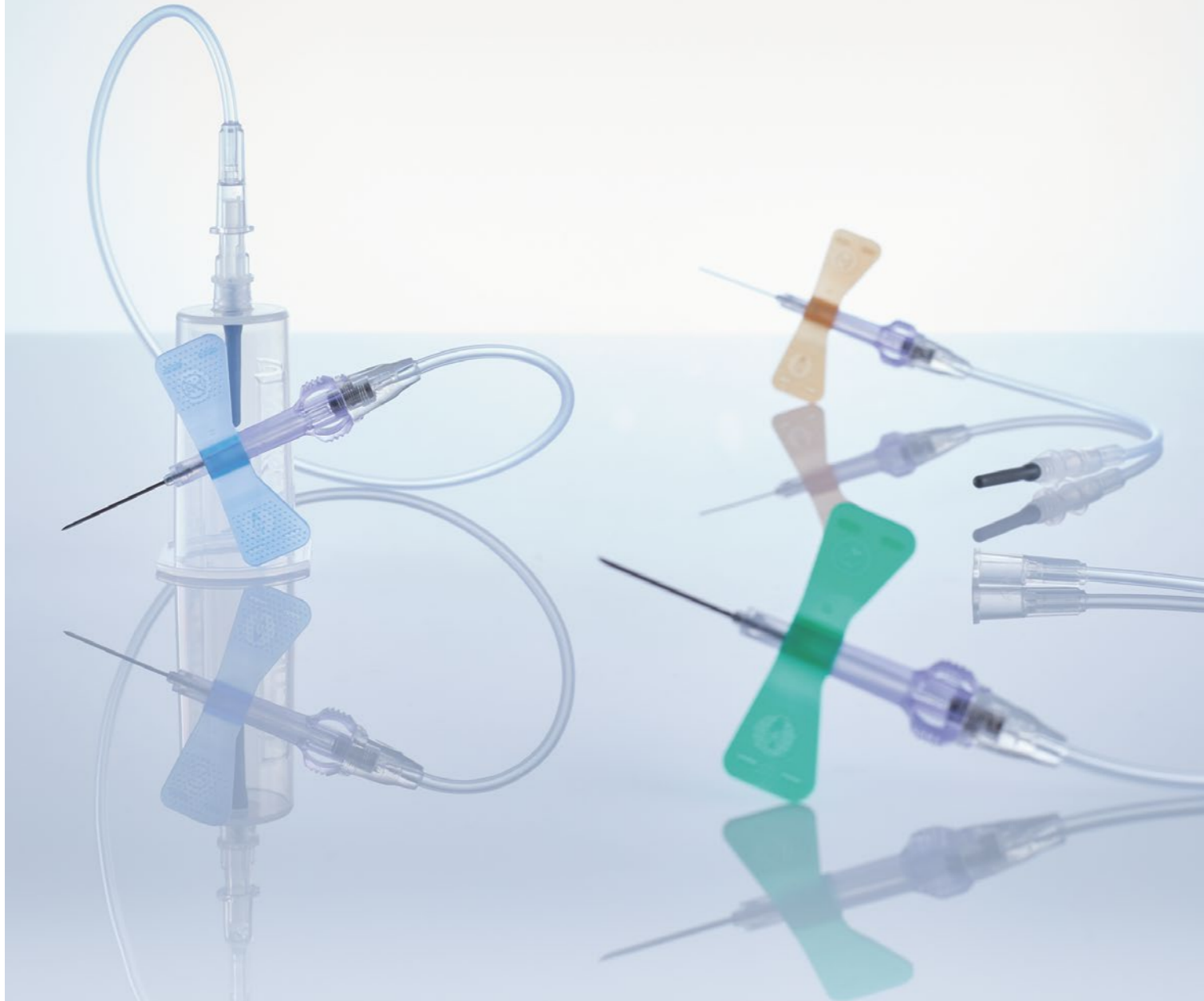

THE GENTLE TOUCH

VACUETTE® EVOPROTECT
Palomilla de SEGURIDAD

El producto puede utilizarse
para la obtención de muestras
sanguíneas y la posterior
infusión a corto plazo durante
un máximo de 4 horas.

EL SIGUIENTE NIVEL DE SEGURIDAD

El mecanismo de seguridad semiautomático le protege frente al riesgo de lesiones causadas por pinchazos con aguja y facilita la tarea diaria de obtención de muestras sanguíneas. Para nosotros una sola lesión ya es demasiado.


La palomilla de seguridad VACUETTE® EVOPROTECT es increíblemente cómoda para el paciente y fácil de utilizar. Es una aguja con aletas con un mecanismo de seguridad, adecuado para la activación

con una sola mano gracias a su diseño. La activación del mecanismo de seguridad mientras la aguja está en vena colabora eficazmente en la prevención del riesgo de daños ocasionados por punciones accidentales con la aguja.

Las paredes extrafinas de las agujas 21G y 23G favorecen la velocidad de flujo y, por lo tanto, se reduce la duración de la obtención de muestras sanguíneas/ infusión.

MECANISMO DE SEGURIDAD SEMIAUTOMÁTICO.

- / Un clic claramente audible confirma la correcta activación del mecanismo de seguridad.
- / A continuación, la aguja se retrae automáticamente, a la vez que la cubierta protectora de seguridad la envuelve de forma segura e irreversible.

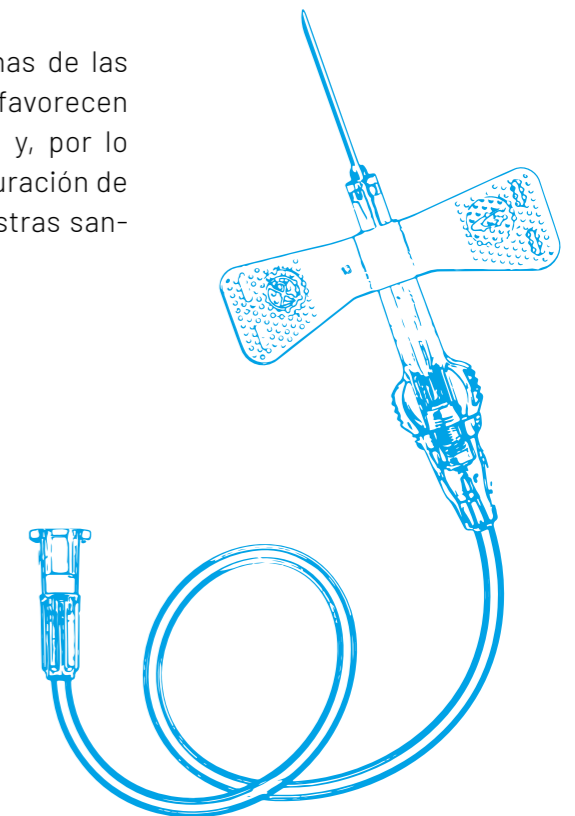


FÁCIL DE
UTILIZAR

gracias a
su diseño

EL SIGUIENTE NIVEL DE SEGURIDAD

VACUETTE® EVOPROTECT


El sistema de activación del mecanismo de seguridad semiautomático patentado se encuentra en los laterales del cuerpo del dispositivo, lo que permite la activación del mecanismo con una sola mano y de la forma más delicada posible para el paciente.

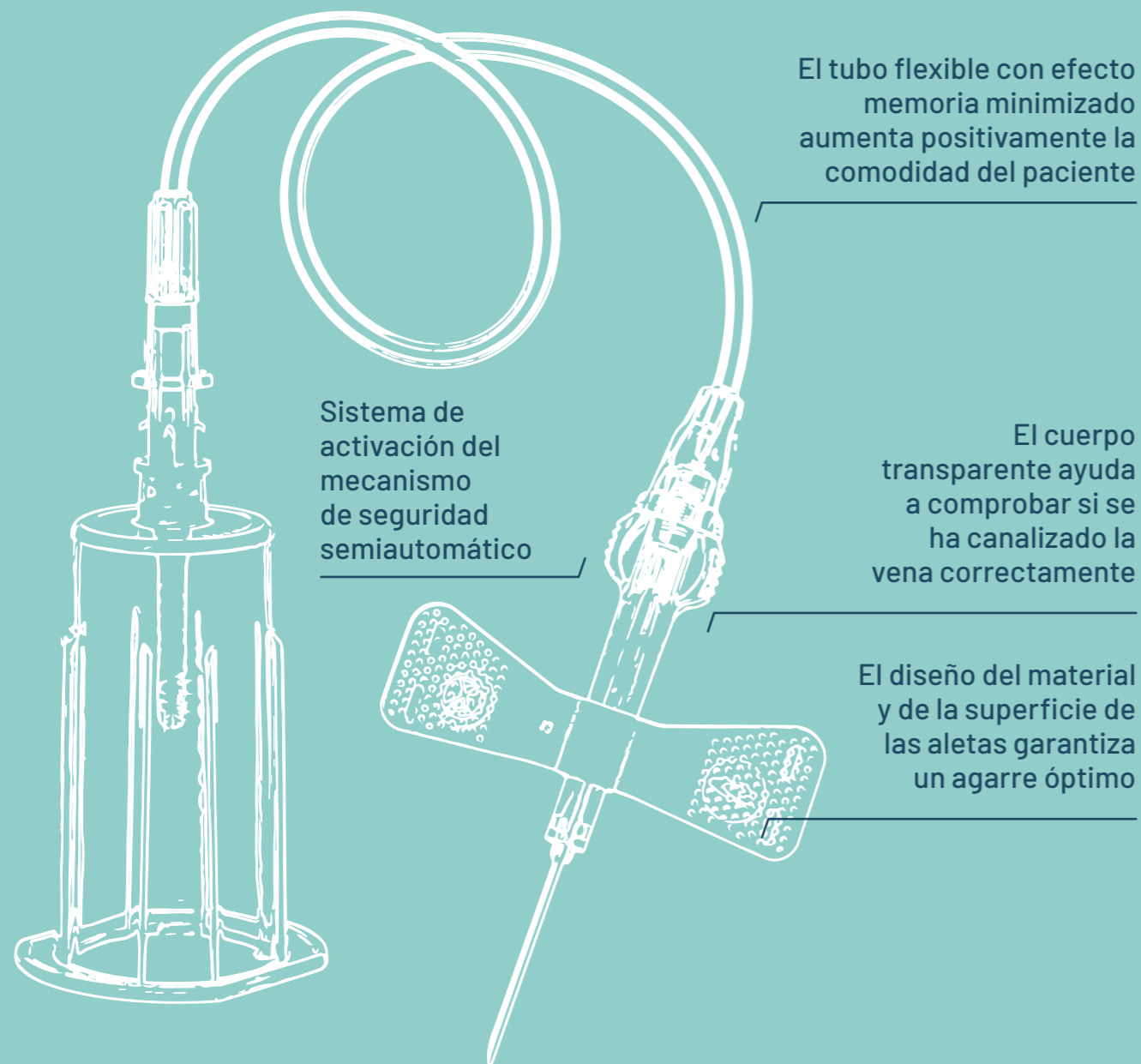

CONSULTE LAS
INSTRUCCIONES
DE USO

en www.gbo.com

MÁXIMA SEGURIDAD DE USO

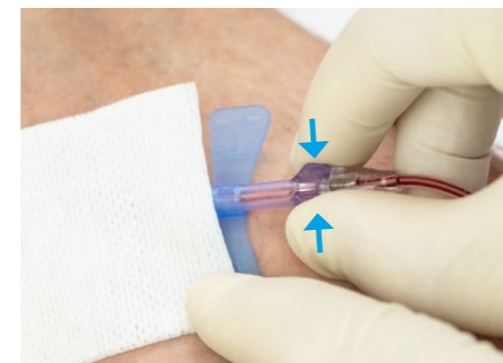

1

Active el mecanismo de seguridad con una mano **presionando los botones de desbloqueo de color azul**. Asegúrese de no obstaculizar la retracción automática.



2

Cuando la aguja se haya retraído automáticamente, oirá un **clic**. Esto indica que el mecanismo de seguridad se ha activado correctamente.



EL MUELLE DEL MECANISMO

permite la activación semiautomática mientras la aguja está todavía en la vena del paciente.



SEGURIDAD A TODOS LOS NIVELES

En nuestra gama de productos encontrará el producto adecuado para cada nivel de seguridad. Desde productos básicos hasta productos de seguridad premium con un mecanismo de seguridad semiautomático.



ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

Nuestros delegados de ventas estarán encantados de asesorarle en cualquier momento si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos y su uso. Juntos encontrarán el producto adecuado en función de sus necesidades.



FORMACIÓN

Ofrecemos una amplia gama de actividades formativas para el uso correcto de nuestros productos. En persona o virtualmente con nuestros expertos en aplicaciones, en seminarios web o cursos de formación online en nuestra página web.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Portatubos VACUETTE® QUICKSHIELD

Referencia	Embalaje interior / exterior [uds.]
450230	50 / 1000

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete

Referencia	Color	Tamaño de la aguja	Longitud	Longitud	Pared de la aguja	Embalaje interior / exterior [uds.]
450238V1	● verde	21 G	1"	25 mm	pared fina	30 / 360
450237V1	● verde	21 G	1,5"	38 mm	pared fina	30 / 360

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS

Referencia	Color	Tamaño de la aguja	Longitud	Longitud	Pared de la aguja	Embalaje interior / exterior [uds.]
450235V1	● verde	21 G	1"	25 mm	pared fina	30 / 360
450239V1	● verde	21 G	1,5"	38 mm	pared fina	30 / 360
450226V1	● negro	22 G	1"	25 mm	pared fina	30 / 360
450228V1	● negro	22 G	1,5"	38 mm	pared fina	30 / 360

Palomilla de SEGURIDAD para extracción/infusión

Referencia	Color	Tamaño de la aguja	Longitud	Pared de la aguja	Longitud del tubo	Longitud del tubo	Embalaje interior / exterior [uds.]
450091V1	● verde	21 G	19 mm	pared fina	7,5"	19 cm	90 / 1.080
450191V1	● verde	21 G	19 mm	pared fina	12"	30 cm	90 / 1.080
450092V1	● azul	23 G	19 mm	pared fina	7,5"	19 cm	90 / 1.080
450090V1	● naranja	25G	19 mm	pared fina	7,5"	19 cm	90 / 1.080

Palomilla de SEGURIDAD con Adaptador Luer

Referencia	Color	Tamaño de la aguja	Longitud	Pared de la aguja	Longitud del tubo	Longitud del tubo	Embalaje interior / exterior [uds.]
450083V1	● verde	21 G	19 mm	pared fina	4"	10 cm	90 / 1.080
450081V1	● verde	21 G	19 mm	pared fina	7,5"	19 cm	90 / 1.080
450095V1	● verde	21 G	19 mm	pared fina	12"	30 cm	90 / 1.080
450084V1	● azul	23 G	19 mm	pared fina	4"	10 cm	90 / 1.080
450082V1	● azul	23 G	19 mm	pared fina	7,5"	19 cm	90 / 1.080
450096V1	● azul	23 G	19 mm	pared fina	12"	30 cm	90 / 1.080
450099V1	● naranja	25G	19 mm	pared fina	12"	30 cm	90 / 1.080

Palomilla de SEGURIDAD con portatubos

Referencia	Color	Tamaño de la aguja	Longitud	Pared de la aguja	Longitud del tubo	Longitud del tubo	Embalaje interior / exterior [uds.]
450087V1	● verde	21 G	19 mm	pared fina	4"	10 cm	35 / 420
450085V1	● verde	21 G	19 mm	pared fina	7,5"	19 cm	35 / 420
450160V1	● verde	21 G	19 mm	pared fina	12"	30 cm	35 / 420
450088V1	● azul	23 G	19 mm	pared fina	4"	10 cm	35 / 420
450086V1	● azul	23 G	19 mm	pared fina	7,5"	19 cm	35 / 420
450161V1	● azul	23 G	19 mm	pared fina	12"	30 cm	35 / 420

Palomilla de SEGURIDAD con portatubos para hemocultivo

Referencia	Color	Tamaño de la aguja	Longitud	Pared de la aguja	Longitud del tubo	Longitud del tubo	Embalaje interior / exterior [uds.]
450182	● verde	21 G	19 mm	pared fina	7,5"	19 cm	24 / 240
450183	● azul	23 G	19 mm	pared fina	7,5"	19 cm	24 / 240
450184	● verde	21 G	19 mm	pared fina	12"	30 cm	24 / 240
450185	● azul	23 G	19 mm	pared fina	12"	30 cm	24 / 240

Palomilla de seguridad para extracción/infusión VACUETTE® EVOPROTECT

Referencia	Color	Tamaño de la aguja	Longitud	Pared de la aguja	Longitud del tubo	Longitud del tubo	Embalaje interior / exterior [uds.]
450120	● verde	21 G	19 mm	pared extrafina	7,5"	19 cm	60 / 1.080
450121	● azul	23 G	19 mm	pared extrafina	7,5"	19 cm	60 / 1.080

Palomilla de seguridad VACUETTE® EVOPROTECT con Adaptador Luer

Referencia	Color	Tamaño de la aguja	Longitud	Pared de la aguja	Longitud del tubo	Longitud del tubo	Embalaje interior / exterior [uds.]
450127	● verde	21 G	19 mm	pared extrafina	7,5"	19 cm	60 / 1.080
450128	● verde	21 G	19 mm	pared extrafina	12"	30 cm	60 / 1.080
450129	● azul	23 G	19 mm	pared extrafina	7,5"	19 cm	60 / 1.080
450130	● azul	23 G	19 mm	pared extrafina	23"	30 cm	60 / 1.080
450132	● naranja	25G	19 mm	pared fina	12"	30 cm	60 / 1.080

Palomilla de seguridad VACUETTE® EVOPROTECT con portatubos

Referencia	Color	Tamaño de la aguja	Longitud	Pared de la aguja	Longitud del tubo	Longitud del tubo	Embalaje interior / exterior [uds.]
450122	● verde	21 G	19 mm	pared extrafina	7,5"	19 cm	30 / 540
450123	● verde	21 G	19 mm	pared extrafina	12"	30 cm	30 / 540
450125	● azul	23 G	19 mm	pared extrafina	7,5"	19 cm	30 / 540
450126	● azul	23 G	19 mm	pared extrafina	12"	30 cm	30 / 540

making a difference

www.gbo.com

GREINER BIO-ONE GMBH
KREMSMÜNSTER, AUSTRIA

PHONE +43 7583 6791-0
FAX +43 7583 6318
E-MAIL office@at.gbo.com



GREINER BIO-ONE IS A GLOBAL PLAYER.
FIND THE CONTACT DETAILS OF YOUR
LOCAL PARTNER ON OUR WEBSITE.



This product information is addressed exclusively to healthcare professionals. Devices of Greiner Bio-One are to be used by properly trained healthcare professionals only in accordance with the relevant Instructions for Use (IFU). For a listing of indications, contraindications, precautions and warnings, please refer to the Instructions for Use which accompanies each product or is available for download from our website at www.gbo.com (Download Center). For more information contact your local Greiner Bio-One sales representative or visit our website.

All information is provided without guarantee despite careful processing. Any liability, warranty or guarantee of Greiner Bio-One GmbH is excluded. All rights, errors and changes are reserved. If not stated otherwise, Greiner Bio-One GmbH has all copyrights and/or other (user-)rights in this documents, in particular to signs such as the mentioned (word-picture-)brands and logos. Any use, duplication or any other use of the rights of Greiner Bio-One GmbH is expressly prohibited.
Media owner: Greiner Bio-One GmbH / **Manufacturer:** [Samson Druck GmbH / 5581 St. Margarethen]

980155 es [rev.05 09.2024]


greiner
BIO-ONE