



## Speedy Otomatik Holder Kullanım Talimatları



### Kullanım Amacı

Speedy Otomatik Holder, rutin venöz kan alma prosedürlerinde bir sistem olarak çok kullanımlık kan alma iğneleri ve vakumlu kan alma tüpleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış steril olmayan plastik bir tutucudur. Dezenfeksiyondan sonra Speedy Otomatik Holder tekrar kullanılabilir.

### Ürün tanımı

Speedy Otomatik Holder tekrar kullanılabilir bir tutucudur. Kullanılmış iğne, serbest bırakma mekanizmasına basılarak serbest bırakılır, böylece iğne doğrudan kesici-delici alet atık kabına düşer. Serbest bırakma mekanizması otomatik olarak geri çekilmek üzere tasarlanmıştır. Bu cihazın tek kullanımlık holder olarak kullanılması önerilir. Ürün, bu talimatlar uyarınca yalnızca uygun eğitimi almış sağlık uzmanları tarafından kullanılmalıdır.

### Kullanım

- Her kullanımdan önce Speedy Hızlı Açılır Holderını gözle görülür hasar veya kontaminasyon açısından inceleyin.  
**NOT:** Kurumunuzun politikasına göre temizleyin veya derhal atın.
- Holderı bir elinizle kavrayın ve iğneyi (saat yönünde) tutucuya takın. İğnenin holdera sıkıca oturduğundan emin olun.  
**NOT:** Kan alma sırasında iğnenin gevşemesine neden olabileceğinden, iğneyi aşırı döndürmeyin! Lütfen iğne konumunun tamamen düz olduğundan emin olun. Düz değilse, iğnenin holderda sabit kalacağı garanti edilemez.
- Kan alma işlemini tesisinizin politikasına uygun olarak gerçekleştirin.
- Kan aldıktan sonra, Speedy Hızlı Açılır Holderı iğne ucu aşağıyı gösterecek şekilde bir kesici-delici alet atık kabının üzerinde, deliğe yakın bir konumda tutun.
- Mavi serbest bırakma mekanizmasının dudak kısmına bastırarak iğneyi atın.
- Serbest bırakma mekanizmasındaki yay özelliği sayesinde cihaz otomatik olarak geri çekilir ve bir sonraki kullanıma hazır olur.  
**NOT:** Yeniden kullanılabilir holderların yasaklanmadığı bazı ülkelerde yaklaşık 100 kez kullanılabilir.

### Önlemler/Dikkat Edilecek Konular

- Talimatlar uygun bir biçimde yerine getirildiğinde, cihaz amaçlandığı gibi çalışacaktır.
- Her bir aksesuar için mutlaka kullanım talimatlarını inceleyin.
- Bu cihazı kullanarak kan aldığınız sırada mutlaka eldiven takın.
- Kullanım ve atma sırasında ellerinizi daima iğnenin gerisinde tutun.
- Tutucunun iç tarafına kesinlikle dokunmayın.
- Kullanım öncesinde veya sonrasında Speedy Hızlı Açılır Holderda gözle görülür bir kontaminasyona olması durumunda holderı tıbbi aletler için önerilen dezenfektan solüsyonuna (kurumunuzun prosedürlerine uygun olarak) batırın.
- Bir iğnenin kapağını kesinlikle tekrar kapatmayın. Güvenlik aksesuarlarının kullanılması önerilir.
- İğneyi eğmeyin.
- Vakumlu kan alma sistemi kullanırken tüplerin doğru bir biçimde dolduğunu mutlaka kontrol edin.

Sadece Avrupa Birliği üye ülkeleri için geçerlidir. Ürünle ilgili olarak herhangi bir ciddi olay meydana gelirse üreticiye ve kullanıcının/hastanın bulunduğu üye ülkedeki yetkili makama bildirilmelidir.


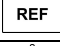
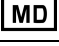



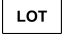


### Saklama


Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Saklama Sıcaklığı: 4-36 °C. Tavsiye edilen maksimum saklama sıcaklığının aşılması, holderın bozulmasına neden olabilir.

### Atma

Bulaşıcı maddelerin uygun bir şekilde elden çıkarılmasına yönelik genel hijyen ilkeleri ve kanuni düzenlemeler göz önüne alınmalı ve uygulanmalıdır. Holderın hasarlı olması, renginin bozulması, gözle görülür şekilde kontamine olması veya aşınma belirtileri göstermesi durumunda veya kullanımdan sonra holderı ve tüm tek kullanımlık aksesuarları birlikte uygun biyolojik tehlike bertaraf konteynerlerine atın.


### Etiket bilgileri

	Üretici		Katalog numarası		Tıbbi cihaz
	Son kullanım tarihi		Sıcaklık limiti		Güneş ışığından uzak tutunuz
	Parti kodu		Kullanım talimatlarına başvurun		İsviçre'deki yetkili temsilci

 Greiner Bio-One GmbH  
Bad Haller Str. 32  
4550 Kremsmünster  
Avusturya

Avusturya'da üretilmiştir

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)  
[office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)  
Telefon +43 7583 6791

 Greiner Bio-One Vacuette Schweiz GmbH  
St. Leonhardstraße 39  
9000 St. Gallen, İsviçre