

## VACUETTE® QUICKSHIELD Complete (mit rotierbarem Schild) Gebrauchsanweisung

### Verwendungszweck

Der **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** ist zusammen mit den **VACUETTE®** Blutentnahmeröhrchen als System zur einmaligen Verwendung für die venöse Blutentnahme bestimmt. Es wurde mit einer Sicherheitskappe konstruiert, welche direkt nach der Blutentnahme aktiviert werden kann, um darin die gebrauchte Nadel zu sichern und vor Nadelstichverletzungen zu bewahren. Das Produkt sollte nur von sorgfältig geschultem Personal gemäß dieser Gebrauchsanweisung benutzt werden.

### Produktbeschreibung

Der **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** Sicherheitsröhrchenhalter ist ein aus Kunststoff gefertigtes Einwegprodukt mit einer bereits eingeschraubten **VACUETTE®** Mehrfachentnahmekanüle in einer sterilen Verpackung. Der **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** Sicherheitsröhrchenhalter wurde mit einer Sicherheitskappe konstruiert, welche direkt nach der Blutentnahme aktiviert werden kann, um darin die gebrauchte Nadel zu sichern.

### Sicherheits-/Warnhinweise

1. Benutzen Sie keinen beschädigten **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** Sicherheitsröhrchenhalter!
2. Jeder **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** Sicherheitsröhrchenhalter, der mit Blut kontaminiert wurde, ist als gefährlich einzustufen und sollte umgehend entsorgt werden.
3. Kanülen nicht wieder verschließen.
4. Kanülen nicht verbiegen.
5. Nach der Blutentnahme entsorgen Sie gebrauchte Kanüle samt **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** Sicherheitsröhrchenhalter in die dafür vorgesehenen Entsorgungsboxen in Übereinstimmung mit den Sicherheitsrichtlinien vor Ort.
6. Behalten Sie die Hände während und nach der gesamten Blutentnahme hinter der Nadel.
7. Die Handhabung von biologischen Proben und Zubehör für die Blutentnahme muss unter Beachtung und Einhaltung der jeweils gültigen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen erfolgen.
8. Im Falle einer Exposition mit biologischen Proben (zB durch eine Nadelstichverletzung) und einem daraus folgenden Infektionsrisiko wird die sofortige medizinische Versorgung empfohlen. HBV, HCV, HIV und andere infektiöse Krankheiten können durch Kontakt mit biologischen Proben übertragen werden.
9. Für die Entsorgung von **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** Sicherheitsröhrchenhaltern mit eingeschraubter Blutentnahme-Kanüle sind die dafür vorgesehenen Entsorgungsboxen zu verwenden.
10. Tragen Sie Handschuhe während der Blutentnahme, um die Gefahr des Kontaktes mit Blut zu minimieren.

### Lagerung vor Gebrauch

Empfohlene Lagerungstemperatur: 4–36°C (40–97° F).

**HINWEIS:** Vermeiden Sie die Einwirkung von direktem Sonnenlicht. Die Überschreitung der max. empfohlenen Lagertemperatur kann die Qualität der Halter beeinträchtigen.

### Handhabung

**LESEN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN DURCH, BEVOR SIE MIT DER BLUTENTNAHME BEGINNEN.**

TRAGEN SIE HANDSCHUHE WÄHREND DER BLUTENTNAHME UND DER ARBEIT MIT BLUTENTNAHMERÖHRCHEN, UM DIE GEFAHR DES KONTAKTES MIT BLUT ZU VERRINGERN!


1. Öffnen Sie den Blister und entfernen Sie den Halter vollständig aus der Verpackung.

**Hinweis:** Die Blisterverpackung ist auch ein Sterilitäts- und Integritätsindikator. Wenn die Verpackung beschädigt oder offen ist, werfen Sie den **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** Halter und wählen Sie einen neuen.

**Hinweis:** Verbiegen Sie die Nadel auf keinen Fall und verwenden Sie keine gebogene Nadel.

Der Punkt auf der Nadelschutzkappe zeigt die Orientierung des Kanülenschliffs.

2. Der Schutzschild kann nun in die bevorzugte Position gedreht werden, wo er während der Venenpunktion stabil verbleibt.
3. Wählen Sie die Einstichstelle. Stauen Sie die Vene (max. 1 Minute) und desinfizieren Sie die Einstichstelle. Keine Palpation nach dem Reinigen!
4. Halten Sie den Arm des Patienten schräg nach unten. Entfernen Sie die Nadelschutzkappe. Führen Sie die Venenpunktion, mit dem Patientenarm nach unten und der Röhrchenkappe nach oben gerichtet, durch.
5. Drücken Sie das Röhrchen in den **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** Sicherheitsröhrchenhalter bis die Kanüle die Gummischutzhülse durchsticht. Achten Sie darauf, das Röhrchen in der Mitte des Gummipropfens zu durchstechen, um ein Austreten von Blut und vorzeitigen Vakuum-Verlust zu verhindern.
6. Lösen Sie die Staubinde, sobald Blut im Röhrchen zu sehen ist. Die Blutprobe soll während der Entnahme nicht mit dem Gummistopfen des Röhrchens in Berührung kommen. D.h. keinesfalls das Röhrchen kopfüber positionieren. Halten Sie das Röhrchen mit Hilfe des Daumens in der Position, um eine komplette Befüllung zu erreichen.

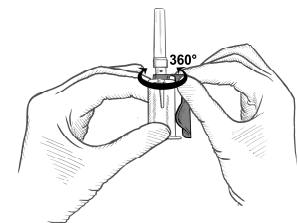

**HINWEIS:** Blut kann gelegentlich am Gummischutzventil auslaufen. Folgen Sie den Sicherheitsrichtlinien vor Ort, um die Gefahr eines Kontaktes mit infektiösem Material zu minimieren.

- Platzieren Sie die nachfolgenden Röhrgen in den Halter. Versichern Sie sich, dass der Inhalt des Röhrgens die Kappe oder das Nadelende während der Blutabnahme nicht berührt.
- Wenn der Blutfluss beim letzten Röhrgen stoppt, entfernen Sie vorsichtig die Kanüle aus der Vene. Drücken Sie mit einem trockenen und sterilen Tupfer auf die Entnahmestelle bis die Blutung aufhört. Sobald die Gerinnung eingesetzt hat, bringen Sie ein Pflaster und falls benötigt einen Verband an.


Die Kanüle nicht Wiederverschließen! Das Wiederverschließen von Kanülen erhöht das Risiko einer Nadelstichverletzung.

**HINWEIS:** Nach der Blutentnahme kann sich in der Vertiefung der Kappe Restblut befinden. Treffen Sie Vorkehrungen um beim Hantieren mit den Röhrgen einen Kontakt mit diesem Blut zu vermeiden. Jeder **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** Sicherheitsröhrgenhalter, der mit Blut kontaminiert wurde, ist als gefährlich einzustufen und sollte umgehend entsorgt werden.

#### Aktivierung der Sicherheitskappe

Nach der Entnahme des letzten Röhrgens entfernen Sie die Nadel aus der Vene. Direkt danach sollte folgende Verfahrensweise zur Verhinderung von Nadelstichverletzungen angewendet werden um den Sicherheitsschild zu aktivieren.

- Den Sicherheitsschild aktivieren, indem der Schild auf einem stabilen Untergrund sachte in Richtung Nadel gedrückt wird. Der Schild kann auch mit Daumen oder Finger aktiviert werden. Dabei müssen Daumen und Finger jedoch stets hinter dem Schild verbleiben. (Siehe A1/A2)
- Ein deutlich hörbares „klicken“ ist das Zeichen dafür, dass die Sicherheitskappe gänzlich und korrekt aktiviert wurde. Das Risiko einer Nadelstichverletzung ist nun nahezu auszuschließen. (Siehe B)
- Entsorgen Sie den gebrauchten **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** Sicherheitsröhrgenhalter samt Nadel in die dafür vorgesehene Entsorgungsbox. (Siehe C)

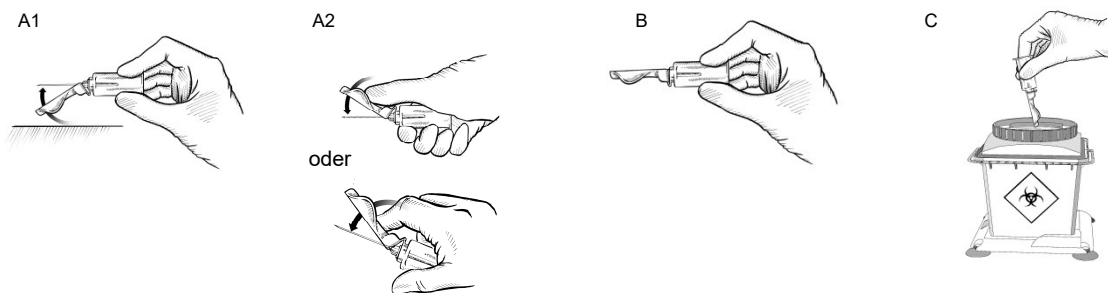




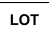







**HINWEIS:** Nachdem der Sicherheitsmechanismus aktiviert wurde, unterlassen Sie gewaltsames Reaktivieren oder Entriegeln.

#### Entsorgung

Die Allgemeinen Hygienerichtlinien und die gesetzlichen Bestimmungen für die ordnungsgemäße Entsorgung von infektiösem Material sind zu beachten und einzuhalten. Das Tragen von Handschuhen vermindert das Risiko von Infektionen. Kontaminierte **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** Sicherheitsröhrgenhalter müssen in geeigneten Abfallbehältern für potentiell, infektiöses Material gesammelt werden und werden üblicherweise in entsprechenden Verbrennungsanlagen oder durch Autoklavieren (Dampfsterilisation) entsorgt.

#### Kennzeichnung

	Hersteller	 	Sterilisation mittels Bestrahlung
	Verwendbar bis (Datum)		Einwegartikel
	Chargenbezeichnung		Gebrauchsanweisung beachten
	Bestellnummer		Temperaturgrenze
	Vor Sonneneinstrahlung schützen		

 Greiner Bio-One GmbH  
Bad Haller Str. 32  
4550 Kremsmünster  
Austria

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)  
[office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)  
Phone +43 7583 6791