

making a difference



**UNSER  
STANDARD FÜR  
IHRE SICHERHEIT**

**VACUETTE®**

Sicherheitsblutentnahmeset

Sicherheit für verschiedenste Venenverhältnisse

  
**greiner**  
BIO-ONE

Das Sicherheitsblutentnahmeset  
bietet dem Patienten besonders  
sanften Abnahmekomfort.



## DECKT IHRE BEDÜRFNISSE FÜR VERSCHIEDENSTE VENENVERHÄLTNISSE

**VACUETTE®**

Sicherheitsblutentnahmeset

Das ergonomische Produkt  
ist einzeln verpackt,  
einfach zu öffnen und  
verursacht wenig Müll.

### SPEZIELL BEI SCHWIERIGEN VENENVERHÄLTNISSEN

Das Sicherheitsblutentnahmeset wurde speziell für Patienten mit schwierigen Venenverhältnissen entwickelt, ist jedoch ebenso für jede andere Blutentnahmesituation geeignet, da es dem Patienten einen besonders sanften Abnahmekomfort bietet.


Das Produkt bietet ein hohes Maß an Sicherheit durch Aktivierung des Schutzmech-

anismus noch während sich die Kanüle innerhalb der Vene befindet. Die korrekte und vollständige Aktivierung wird zusätzlich durch ein deutlich hörbares Klicken angezeigt.

Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter vor dem Risiko einer Nadelstichverletzung, denn jede Verletzung ist bereits eine zuviel.

### INTUITIVES PRODUKTDESIGN.

- / Automatische Blutflusskontrolle im transparenten Sichtfenster zeigt an, ob die Vene richtig punktiert wurde.
- / Einfaches Auslösen des Sicherheitsmechanismus durch leichten Druck auf die beiden Seitenteile des Schiebers. Die vollständige Aktivierung ist durch ein deutliches „Klicken“ hörbar.
- / Kann sowohl für eine Blutentnahme als auch für Infusionen für bis zu fünf Stunden eingesetzt werden.\*
- / Ein Schlauch mit unterschiedlichen Längen bietet mehr Flexibilität bei der Blutentnahme.

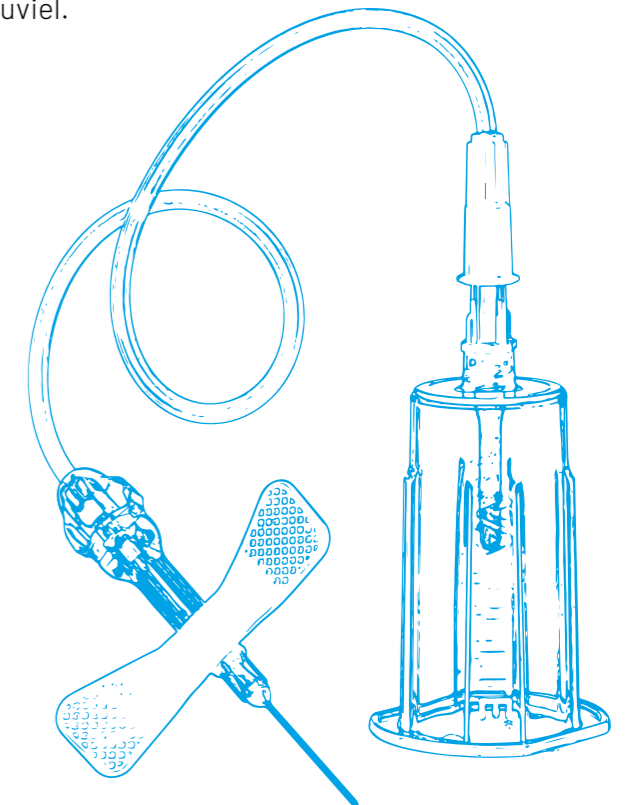

\* ausgenommen Sicherheitsblutentnahmeset mit Blutkulturhalter

## SICHERHEITSBLUTENTNAHMESETS KOMBIPRODUKTE

Als praktisches Kombiprodukt erhalten Sie das Sicherheitsblutentnahmeset auch bereits vormontiert und in einer sterilen Blisterverpackung.



### Sicherheitsblutentnahmeset + Luer Adapter

Vormontiertes Set samt Luer-Adapter in steriler Blisterverpackung.

Die Handhabung wird optimiert.



### Sicherheitsblutentnahmeset + Halter

Kein Einschrauben der Nadel erforderlich.

Die praktische Koplettlösung spart Zeit.

Sterile Blisterverpackung.



### Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturhalter

Vormontiert für Blutkultur-Entnahme.



Kompatibel mit gängigen Weithals-Blutkulturflaschen sowie evakuierten Blutentnahmeröhrchen.

Nur eine Venenpunktion für Kultur- und Blutentnahme erforderlich.

Sterile Blisterverpackung.

## ANWENDUNGSHINWEISE\*

BITTE  
BEACHTEN  
SIE DIE  
GEBRAUCHS-  
ANWEISUNG  
auf [www.gbo.com](http://www.gbo.com)

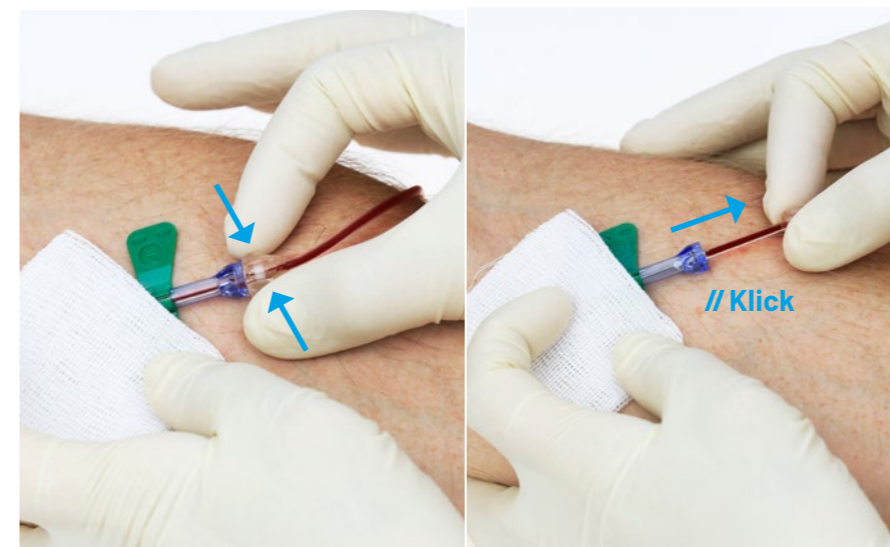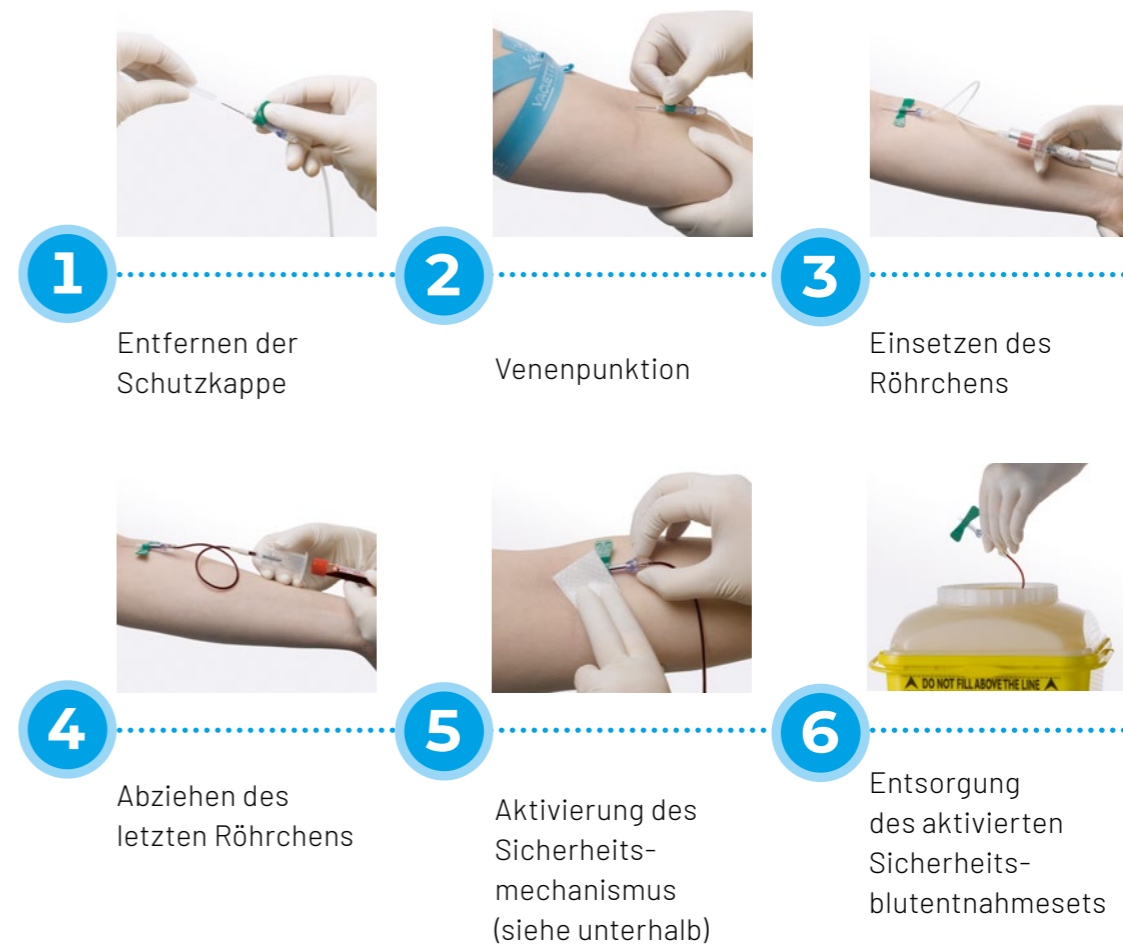

### AKTIVIERUNG DES SICHERHEITS- MECHANISMUS

Leichtes Drücken an beiden Seiten des Sicherheitsmechanismus. Den Schieber nach hinten ziehen, bis ein Klicken zu hören ist.

Das Klicken signalisiert die Aktivierung.



## SICHERHEIT FÜR JEDES LEVEL

In unserem Sortiment finden Sie das passende Produkt für jedes Sicherheitslevel. Von Einstiegsprodukten bis hin zu Premium Sicherheitsprodukten mit halbautomatischem Sicherheitsmechanismus.



## PERSÖNLICHE BERATUNG

Unsere Vertriebsmitarbeiter beraten Sie gerne jederzeit bei Fragen zu unseren Produkten und deren Anwendung. Gemeinsam finden Sie das richtige Produkt für Ihre individuellen Bedürfnisse.



## SCHULUNGSMÖGLICHKEITEN

Für den richtigen Umgang mit unseren Produkten bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Schulungsmöglichkeiten an. Persönlich oder virtuell mit unseren Anwendungsexperten oder in Webinaren oder eLearning Kursen online auf unserer Website.

## PRODUKTÜBERSICHT

### Sicherheitsblutentnahme- / infusionssets

Art. Nr.	Farbcodierung	Nadelgröße	Nadellänge	Nadelwandtyp	Schlauchlänge	Schlauchlänge	Stück UVP / VP
450091V1	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	7.5"	19 cm	90 / 1.080
450191V1	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	12"	30 cm	90 / 1.080
450092V1	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	7.5"	19 cm	90 / 1.080
450090V1	● orange	25 G	19 mm	dünnwandig	7.5"	19 cm	90 / 1.080

### Sicherheitsblutentnahmesets + Luer Adapter

Art. Nr.	Farbcodierung	Nadelgröße	Nadellänge	Nadelwandtyp	Schlauchlänge	Schlauchlänge	Stück UVP / VP
450083V1	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	4"	10 cm	90 / 1.080
450081V1	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	7.5"	19 cm	90 / 1.080
450095V1	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	12"	30 cm	90 / 1.080
450084V1	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	4"	10 cm	90 / 1.080
450082V1	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	7.5"	19 cm	90 / 1.080
450096V1	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	12"	30 cm	90 / 1.080
450099V1	● orange	25 G	19 mm	dünnwandig	12"	30 cm	90 / 1.080

### Sicherheitsblutentnahmesets + Halter

Art. Nr.	Farbcodierung	Nadelgröße	Nadellänge	Nadelwandtyp	Schlauchlänge	Schlauchlänge	Stück UVP / VP
450087V1	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	4"	10 cm	35 / 420
450085V1	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	7.5"	19 cm	35 / 420
450160V1	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	12"	30 cm	35 / 420
450088V1	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	4"	10 cm	35 / 420
450086V1	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	7.5"	19 cm	35 / 420
450161V1	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	12"	30 cm	35 / 420

### Sicherheitsblutentnahmesets + Blutkulturhalter

Art. Nr.	Farbcodierung	Nadelgröße	Nadellänge	Nadelwandtyp	Schlauchlänge	Schlauchlänge	Stück UVP / VP
450182	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	7.5"	19 cm	24 / 240
450183	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	7.5"	19 cm	24 / 240
450184	● grün	21 G	19 mm	dünnwandig	12"	30 cm	24 / 240
450185	● blau	23 G	19 mm	dünnwandig	12"	30 cm	24 / 240

# making a difference

[www.gbo.com](http://www.gbo.com)

**GREINER BIO-ONE GMBH**  
KREMSMÜNSTER, AUSTRIA

**PHONE** +43 7583 6791-0  
**FAX** +43 7583 6318  
**E-MAIL** [office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)



**GREINER BIO-ONE IS A GLOBAL PLAYER.**  
FIND THE CONTACT DETAILS OF YOUR  
LOCAL PARTNER ON OUR WEBSITE.



This product information is addressed exclusively to healthcare professionals. Devices of Greiner Bio-One are to be used by properly trained healthcare professionals only in accordance with the relevant Instructions for Use (IFU). For a listing of indications, contraindications, precautions and warnings, please refer to the Instructions for Use which accompanies each product or is available for download from our website at [www.gbo.com](http://www.gbo.com) (Download Center). For more information contact your local Greiner Bio-One sales representative or visit our website.

All information is provided without guarantee despite careful processing. Any liability, warranty or guarantee of Greiner Bio-One GmbH is excluded. All rights, errors and changes are reserved. If not stated otherwise, Greiner Bio-One GmbH has all copyrights and/or other (user-)rights in this documents, in particular to signs such as the mentioned (word-picture-)brands and logos. Any use, duplication or any other use of the rights of Greiner Bio-One GmbH is expressly prohibited.  
**Media owner:** Greiner Bio-One GmbH / **Manufacturer:** [Samson Druck GmbH / 5581 St. Margarethen]

980156 de [rev.04.09.2024]

  
**greiner**  
BIO-ONE