

making a difference



**GARANTIAMO  
LA VOSTRA  
SICUREZZA**

**VACUETTE®**

**Prodotti di sicurezza**

Greiner Bio-One offre una vasta gamma di prodotti di sicurezza per diverse esigenze.



**greiner**  
BIO-ONE

Le conseguenze di una ferita causata da una puntura di ago possono avere effetti a lungo termine sulla carriera e sulla vita personale della persona che ne è stata vittima e sui suoi familiari.



---

Uno dei modi più efficaci per proteggersi è l'uso di prodotti di sicurezza.

---

## LE FERITE DA PUNTURA DI AGO APPARTENGONO AL PASSATO

Un gran numero di tutte le malattie infettive acquisite sul lavoro nel settore sanitario è dovuto a ferite da puntura. Le ferite da puntura di ago rappresentano di gran lunga il più alto rischio di infezione.

Più del 50% di tutti i casi registrati riguardano il personale infermieristico, seguito dai medici e dal personale di laboratorio. Tuttavia, questo non

significa che le punture accidentali da aghi rappresentino un rischio occupazionale inevitabile. L'uso corretto dei prodotti di sicurezza VACUETTE® può contribuire a ridurre questo rischio.

I prodotti di sicurezza VACUETTE® sono conformi alla direttiva UE (UE 2010/32).

## CI PRENDIAMO CURA DELLA VOSTRA SICUREZZA.

- / Ampia gamma di prodotti di sicurezza.
- / Diversi prodotti a seconda dell'area di applicazione.
- / Il prodotto di sicurezza giusto per ogni situazione.

## IL PRODOTTO DI SICUREZZA GIUSTO PER OGNI SITUAZIONE

Offriamo una vasta gamma di prodotti di sicurezza in modo da poter selezionare i prodotti più adatti per ogni mercato e cliente. Da Greiner Bio-One potete scegliere tra i nostri dispositivi di sicurezza standard e i nostri prodotti premium.

Nelle pagine seguenti troverete una panoramica dei nostri prodotti con cui potrete proteggervi nel miglior modo possibile contro le ferite da puntura di ago.

**SICUREZZA PER OGNI LIVELLO**  
e i bisogni individuali

## LE OPZIONI DI PRODOTTO DI GREINER BIO-ONE

Nella nostra gamma di prodotti troverete il prodotto giusto per ogni livello di sicurezza. Dai prodotti senza meccanismo di sicurezza ai prodotti di sicurezza premium, vi offriamo il prodotto per le vostre esigenze individuali.



### Venipuntura standard.

Per i prelievi di sangue quotidiani raccomandiamo l'utilizzo della nostra camicia di sicurezza VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS.

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS



### Vene in condizioni difficili.

Tutti i nostri set di sicurezza per il prelievo di sangue sono adatti anche per pazienti con vene in condizioni difficili. Il nostro prodotto premium VACUETTE® EVOPROTECT Set di sicurezza per il prelievo di sangue assicura un prelievo di sangue particolarmente delicato.

VACUETTE® EVOPROTECT o set di SICUREZZA per il prelievo



### Emocolture.

Per il prelievo di campioni per emocolture possiamo raccomandarvi il set di SICUREZZA con holder per emocolture pre-assemblato.

Set di SICUREZZA per la raccolta di sangue con holder per emocoltura (ago 21G o 23G)





## TROVARE RAPIDAMENTE E FACILMENTE IL GIUSTO PRODOTTO DI SICUREZZA

Nella seguente panoramica, potete vedere a colpo d'occhio quali caratteristiche offre il prodotto selezionato e a quale livello di sicurezza vi trovate. Questo vi permette di fare la migliore scelta possibile per le vostre esigenze.

		Prodotto di sicurezza	Ritrazione semiautomatica dell'ago	Attivazione quando l'ago è in vena	Attivazione con una sola mano	Prodotto pre-assemblato	Finestra di visualizzazione per indicare il flusso del sangue	Posizionamento arbitrario dello scudo di sicurezza	Raccolta di sangue e infusione con lo stesso set	Ago a parete extra sottile (migliore portata)	Con effetto memoria minimo	Non contiene lattice naturale	Senza DEHP
01	VACUETTE® EVOPROTECT Set di sicurezza per prelievo di sangue	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS	✓			✓	✓	✓					✓	✓
	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete	✓			✓	✓	✓					✓	✓
02	Set di sicurezza per prelievo del sangue	✓		✓	✓	✓					✓	✓	✓
	VACUETTE® QUICKSHIELD Holder di sicurezza con ago VISIO PLUS	✓			✓		✓	✓				✓	✓
	VACUETTE® QUICKSHIELD Holder di sicurezza con ago multiplo	✓			✓		✓					✓	✓
03	Set per prelievo di sangue					✓					✓	✓	
	Holder standard con ago						✓					✓	✓

\*216 e 236



Scopri di più sui nostri prodotti di sicurezza qui: [powerforsafety.com](http://powerforsafety.com)



Le ferite da puntura di ago possono essere evitate con prodotti di sicurezza. Proteggetevi!



Uno scudo protegge in modo sicuro l'ago dopo l'attivazione e protegge così dalle ferite da puntura di ago.



## PER LA ROUTINE QUOTIDIANA DI PRELIEVO DI SANGUE

**VACUETTE® QUICKSHIELD**  
Holder di sicurezza

Il design ergonomico dell'holder offre una buona presa per le dita durante il suo utilizzo.

### NESSUN CAMBIAMENTO DELLA PROCEDURA DI PRELIEVO

VACUETTE® QUICKSHIELD Holder di sicurezza della Greiner Bio-One può essere utilizzato opzionalmente con gli aghi per prelievo VACUETTE® o con gli aghi VACUETTE® VISIO PLUS. Nei nostri VACUETTE® QUICKSHIELD Complete e VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS, gli aghi sono già pre-assemblati.


Lo scudo protettivo è attaccato direttamente all'holder.

Grazie all'attivazione con una sola mano dello scudo protettivo con l'aiuto di una superficie d'appoggio stabile o del dito o del pollice, il prodotto convince per l'uso semplicissimo e l'ampia protezione contro ferite e infezioni.

Senza cambiare la tecnica di prelievo, VACUETTE® QUICKSHIELD Holder di sicurezza offre protezione contro le ferite da puntura di ago.

### SCUDO PROTETTIVO PER UNA MAGGIORE SICUREZZA.

- / Nessun cambiamento della tecnica di prelievo.
- / Più flessibilità per quanto riguarda i requisiti specifici dell'utente e del paziente grazie allo scudo protettivo ruotabile.
- / L'attivazione dello scudo protettivo può essere sentita e percepita da un chiaro "click".

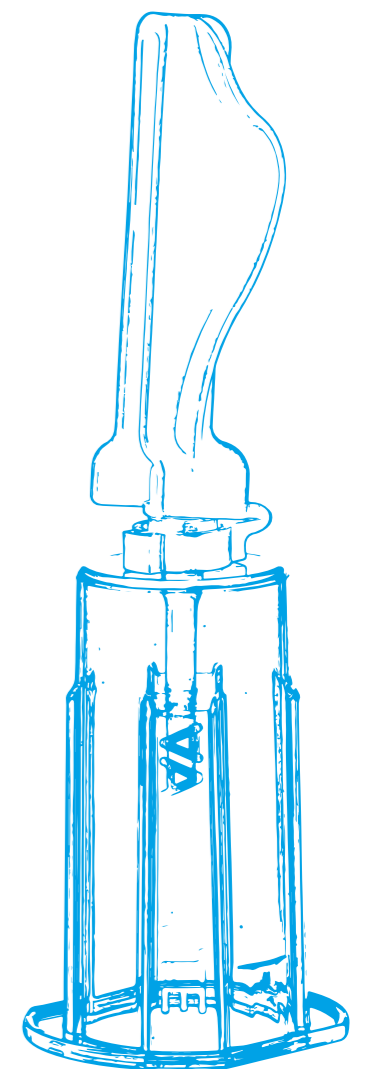



SEMPLICE-  
MENTE  
RISPARMIARE  
TEMPO

con l'ago VISIO PLUS  
pre-assemblato

RISPETTARE  
LE ISTRUZIONI  
PER L'USO

all'indirizzo  
[www.gbo.com](http://www.gbo.com)

## IL PRODOTTO COMBINATO

### VACUETTE® QUICKSHIELD HOLDER PRE-ASSEMBLATO CON AGO

Come prodotto combinato con un'ago pre-assemblato, l'holder di sicurezza viene confezionato singolarmente in un blister sterile.

Lo scudo  
protettivo  
può essere  
posizionato  
in qualsiasi  
direzione

VACUETTE® QUICKSHIELD  
Holder di sicurezza



O:  
VACUETTE® QUICKSHIELD  
Complete\*

O:  
VACUETTE® QUICKSHIELD  
Complete PLUS\*\*

L'ago VISIO PLUS ha una  
camera di visualizzazione  
trasparente per il controllo  
visivo del flusso di sangue

\* pre-assemblato  
con ago da prelievo  
multiplo VACUETTE®


\*\* pre-assemblato  
con ago VACUETTE®  
VISIO PLUS

## ATTIVAZIONE DEL MECCANISMO DI SICUREZZA

Opzione 1



Opzione 2

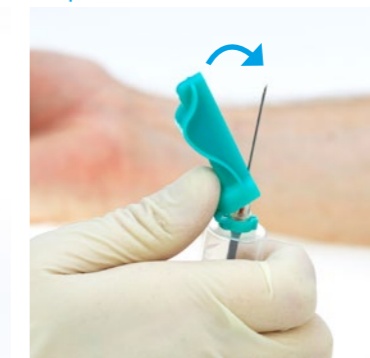

1

Attivare il  
meccanismo di  
sicurezza **su una  
superficie stabile  
o con il dito o il  
pollice.**


2

Non appena lo  
scudo si attiva  
correttamente,  
si sente un **clac**.

## PIÙ SICUREZZA

Una volta che lo  
scudo è inserito, l'ago  
è bloccato in modo  
sicuro e irreversibile.

Il set di sicurezza per prelievo di sangue offre al paziente un comfort di raccolta particolarmente delicato.

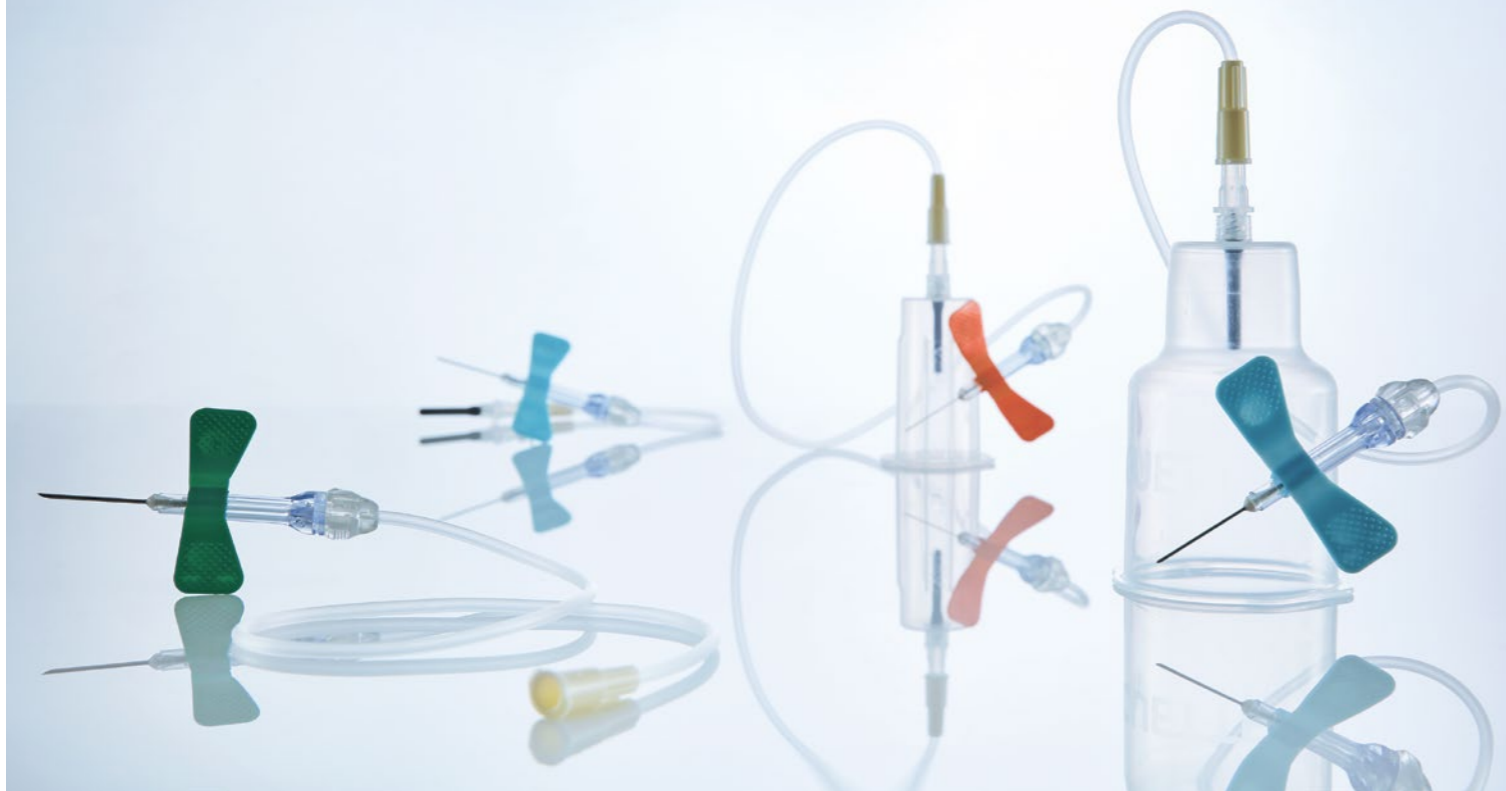

## ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE PER UNA SERIE DI TIPOLOGIE DIFFERENTI DI VENE

**SET DI SICUREZZA**  
per prelievo di sangue

Il prodotto ergonomico è confezionato singolarmente. È facile da aprire e causa pochi rifiuti.

### UN ALTO LIVELLO DI SICUREZZA


Il prodotto offre un alto livello di sicurezza attivando manualmente il meccanismo di protezione mentre la cannula è ancora dentro la vena. La corretta attivazione da parte dell'utente è indicata da un click chiaramente udibile. Il set di sicurezza per il prelievo di sangue fornisce quindi la migliore protezione possibile contro le ferite da puntura di ago. Il controllo visivo della puntura riuscita attraverso una

finestra di visualizzazione trasparente conferma se l'inserzione è riuscita correttamente e può essere utilizzato per il prelievo di sangue o infusioni fino a cinque ore.\*

Il set di sicurezza per prelievo di sangue è un ago a farfalla sterile e monouso collegato a un tubo flessibile, con o senza adattatore Luer o adattatore Luer con holder.

### DESIGN INTUITIVO DEL PRODOTTO.

- / Una camera di visualizzazione tra l'ago e il tubo permette di visualizzare il flusso di sangue.
- / I tubi di diverse lunghezze offrono una maggiore flessibilità per il prelievo di sangue.
- / Facile attivazione del meccanismo di sicurezza.

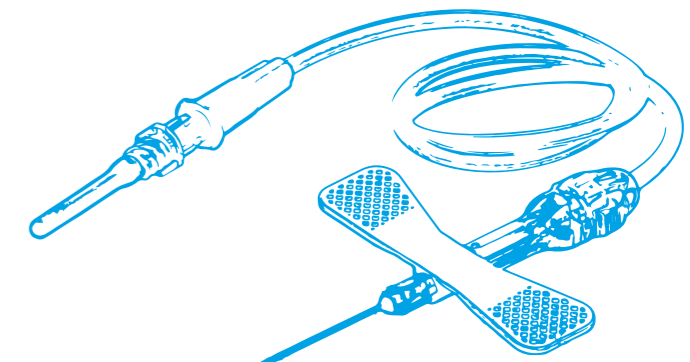

## VERSATILE USARE

per un campione  
di sangue o per  
infusioni\*  
(fino a 5 ore)

RISPETTARE  
LE ISTRUZIONI  
PER L'USO

all'indirizzo  
[www.gbo.com](http://www.gbo.com)

# QUATTRO VARIANTI DI PRODOTTO


## SET DI SICUREZZA PER IL PRELIEVO DI SANGUE

Come pratico prodotto combinato, è possibile ottenere il set di sicurezza per il prelievo di sangue come set per infusione o già pre-assemblato con adattatore Luer, holder o holder per emocoltura in diverse misure di aghi e lunghezze di tubi.

Prodotti in combinazione  
pre-assemblati in  
confezione blister sterile

Tubi di diverse lunghezze  
offrono maggiore flessibilità  
per il prelievo di sangue

La camera tra l'ago e il tubo  
indica il corretto inserimento

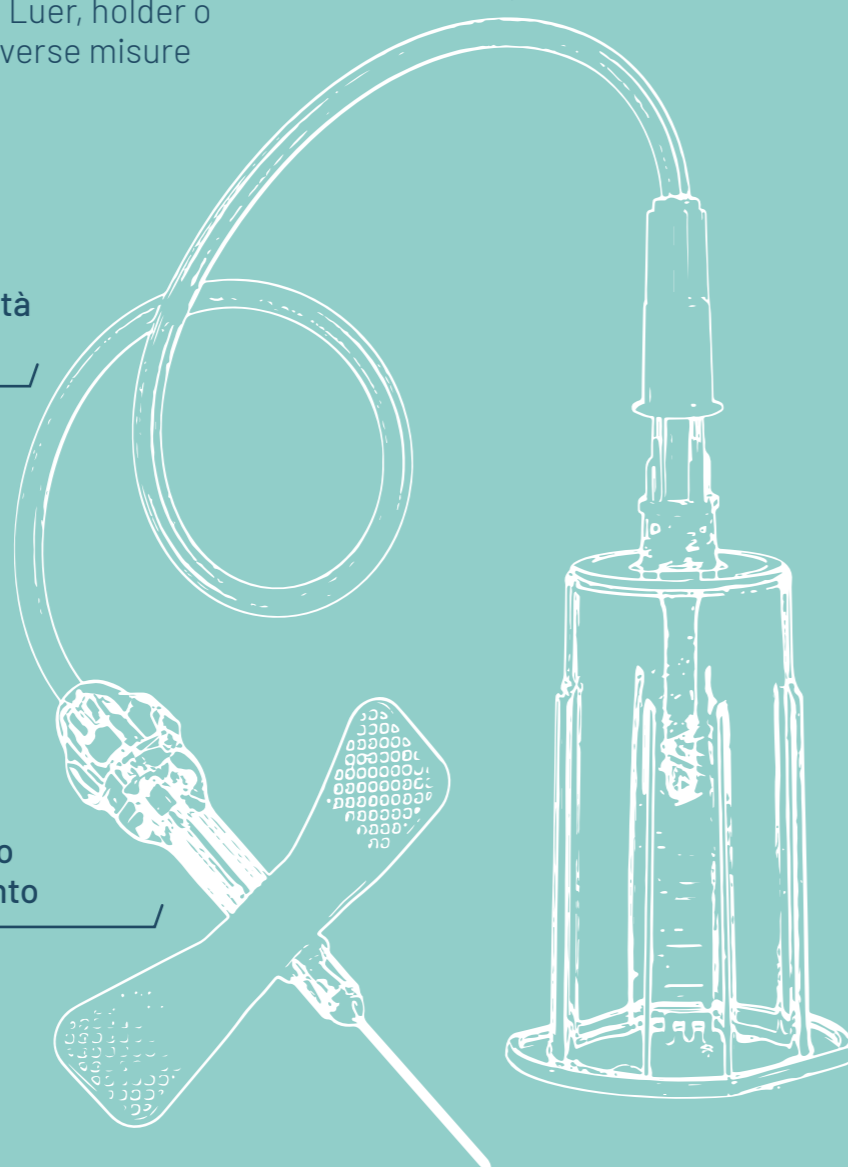


## SEMPLICE ATTIVAZIONE DEL MECCANISMO DI SICUREZZA



1

Rilasciare il meccanismo  
di sicurezza **premendo**  
leggermente sulle due parti  
laterali del dispositivo.

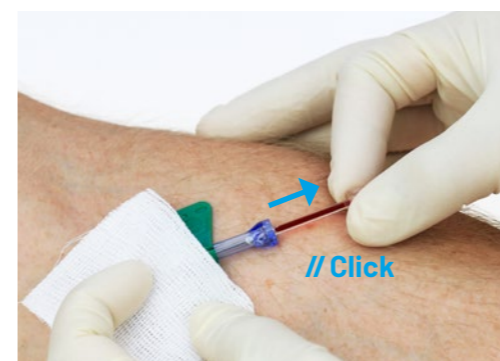

2

Poi tirare la sezione chiara  
all'indietro. L'attivazione  
completa è udibile da un  
chiaro **click**.




## PIÙ SICUREZZA

L'ago è bloccato  
in modo sicuro  
e irreversibile  
nell'alloggiamento  
- per la massima  
sicurezza.



Il prossimo passo evolutivo  
nel prelievo di sangue.

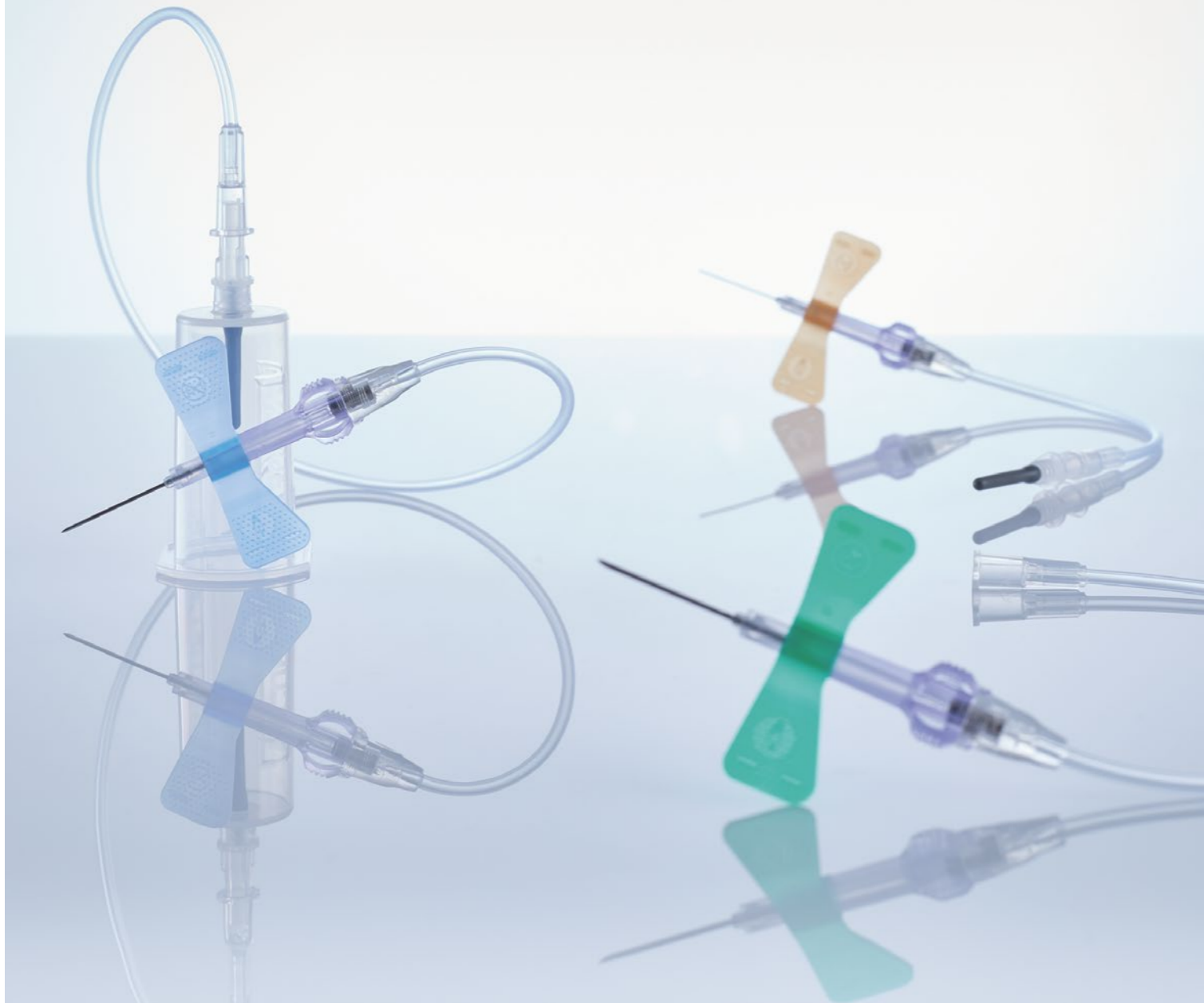

## THE GENTLE TOUCH

**VACUETTE® EVOPROTECT**

Set di sicurezza per prelievo di sangue

Il prodotto può essere utilizzato per un prelievo di sangue seguito da un'infusione a breve termine per un massimo di 4 ore.

### IL PRELIEVO DI SANGUE IN UNA DIMENSIONE COMPLETAMENTE NUOVA

Il meccanismo semi-automatico a molla protegge dal rischio di ferite da puntura di ago e facilita il tuo lavoro quotidiano. Perché ogni ferita da puntura è una di troppo.


Il set di sicurezza per il prelievo di sangue VACUETTE® EVO-PROTECT è particolarmente facile e intuitivo da usare. Consiste in un ago a farfalla con un meccanismo di sicurezza che è adatto all'attivazione con

una sola mano grazie al suo design particolare. L'attivazione del meccanismo di sicurezza quando l'ago è ancora in vena aiuta a prevenire il rischio di punture accidentali da aghi.

Le pareti dell'ago extra sottili delle cannule 21G e 23G hanno un effetto positivo sulla portata e quindi anche sulla durata del prelievo di sangue e dell'infusione.

### MECCANISMO DI SICUREZZA SEMI-AUTOMATICO.

- / Un clic chiaramente udibile conferma l'avvenuta attivazione.
- / L'ago viene retratto e allo stesso tempo bloccato in modo sicuro e irreversibile nell'alloggiamento del prodotto.

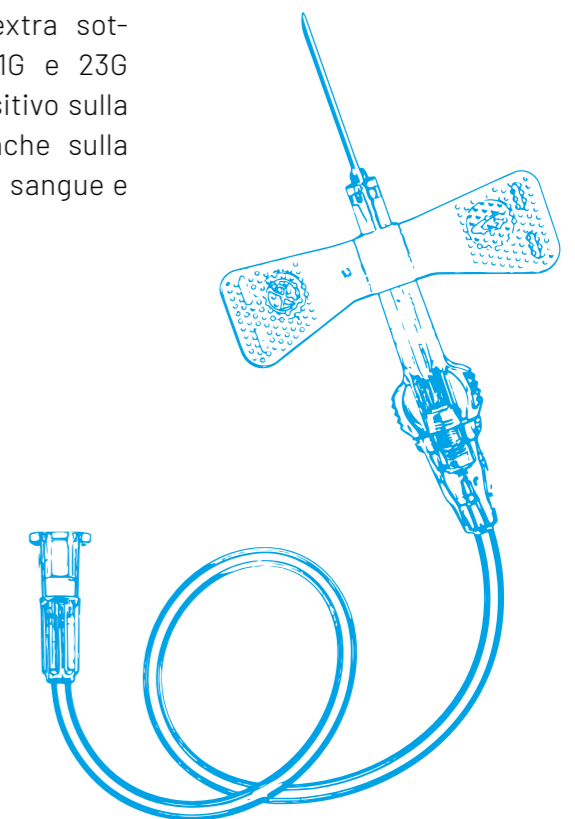

FACILE DA  
USARE

grazie al design  
ottimale per un  
uso intuitivo


RISPETTARE  
LE ISTRUZIONI  
PER L'USO

all'indirizzo  
[www.gbo.com](http://www.gbo.com)


## IL PROSSIMO PASSO EVOLUTIVO

### VACUETTE® EVOPROTECT SET DI SICUREZZA PER PRELIEVO DI SANGUE

I trigger del meccanismo di sicurezza semiautomatico brevettato sono situati sul lato del prodotto per consentire l'attivazione del meccanismo con una sola mano, il più delicato possibile per il paziente.

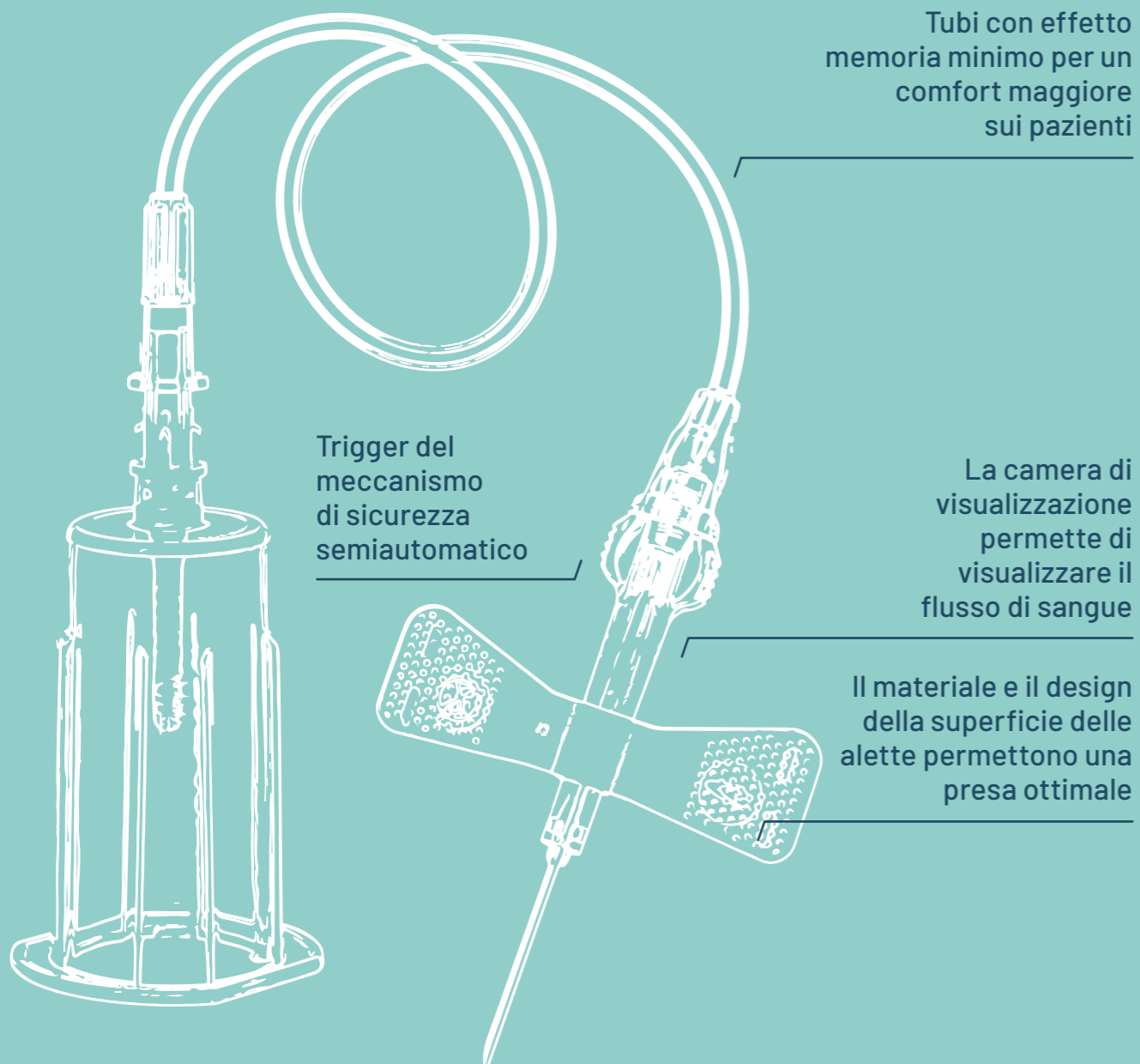


### MASSIMA SICUREZZA DURANTE L'APPLICAZIONE

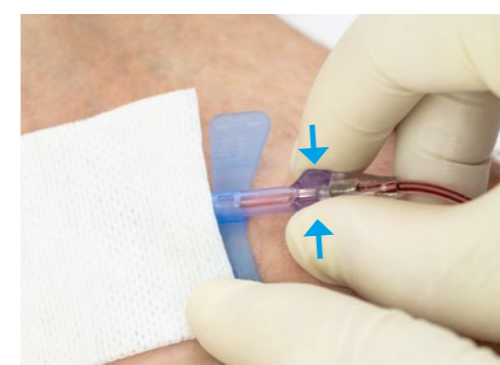

1

Attivare il meccanismo di sicurezza con una mano **premendo i pulsanti blu di rilascio**. Fate attenzione a non ostacolare la retrazione automatica.

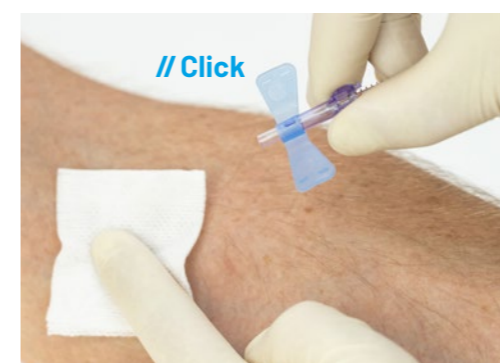

2

Dopo che l'ago si è ritirato automaticamente, si sente un **clac**. Questo è il segno di una corretta e riuscita attivazione del meccanismo di sicurezza.



### IL MECCANISMO A MOLLA

permette l'attivazione semi-automatica mentre l'ago è ancora nella vena del paziente.



## SICUREZZA PER OGNI LIVELLO

Nella nostra gamma troverete il prodotto giusto per ogni livello di sicurezza. Dai prodotti iniziali ai prodotti di sicurezza premium con meccanismo di sicurezza semi-automatico.



## SUPPORTO

Il nostro personale sarà lieto di rispondervi in qualsiasi momento su domande relative ai nostri prodotti e alla loro applicazione. Insieme troverete il prodotto giusto per le vostre esigenze individuali.



## POSSIBILITÀ DI FORMAZIONE

Offriamo una vasta gamma di opportunità di formazione per aiutarvi a utilizzare correttamente i nostri prodotti.

Di persona o virtualmente con i nostri specialisti o in webinar o in corsi eLearning online sul nostro sito web.

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

### VACUETTE® QUICKSHIELD Camicia di sicurezza

Codice	Inner / Outer [Qtà.]
450230	50 / 1.000

### VACUETTE® QUICKSHIELD Complete

Codice	Colore	Misura ago	Lunghezza ago	Lunghezza ago	Tipo di parete ago	Inner / Outer [Qtà.]
450238V1	● verde	21 G	1"	25 mm	sottile	30 / 360
450237V1	● verde	21 G	1,5"	38 mm	sottile	30 / 360

### VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS

Codice	Colore	Misura ago	Lunghezza ago	Lunghezza ago	Tipo di parete ago	Inner / Outer [Qtà.]
450235V1	● verde	21 G	1"	25 mm	sottile	30 / 360
450239V1	● verde	21 G	1,5"	38 mm	sottile	30 / 360
450226V1	● nero	22 G	1"	25 mm	sottile	30 / 360
450228V1	● nero	22 G	1,5"	38 mm	sottile	30 / 360



**Farfalla di SICUREZZA da prelievo e infusione**

Codice	Colore	Misura ago	Lunghezza ago	Tipo di parete ago	Lunghezza tubo	Lunghezza tubo	Inner / Outer [Qtà.]
450091V1	● verde	21 G	19 mm	sottile	7,5"	19 cm	90 / 1.080
450191V1	● verde	21 G	19 mm	sottile	12"	30 cm	90 / 1.080
450092V1	● blu	23 G	19 mm	sottile	7,5"	19 cm	90 / 1.080
450090V1	● arancio	25 G	19 mm	sottile	7,5"	19 cm	90 / 1.080

**Farfalla di SICUREZZA + adattatore Luer**

Codice	Colore	Misura ago	Lunghezza ago	Tipo di parete ago	Lunghezza tubo	Lunghezza tubo	Inner / Outer [Qtà.]
450083V1	● verde	21 G	19 mm	sottile	4"	10 cm	90 / 1.080
450081V1	● verde	21 G	19 mm	sottile	7,5"	19 cm	90 / 1.080
450095V1	● verde	21 G	19 mm	sottile	12"	30 cm	90 / 1.080
450084V1	● blu	23 G	19 mm	sottile	4"	10 cm	90 / 1.080
450082V1	● blu	23 G	19 mm	sottile	7,5"	19 cm	90 / 1.080
450096V1	● blu	23 G	19 mm	sottile	12"	30 cm	90 / 1.080
450099V1	● arancio	25 G	19 mm	sottile	12"	30 cm	90 / 1.080

**Farfalla di SICUREZZA + holder**

Codice	Colore	Misura ago	Lunghezza ago	Tipo di parete ago	Lunghezza tubo	Lunghezza tubo	Inner / Outer [Qtà.]
450087V1	● verde	21 G	19 mm	sottile	4"	10 cm	35 / 420
450085V1	● verde	21 G	19 mm	sottile	7,5"	19 cm	35 / 420
450160V1	● verde	21 G	19 mm	sottile	12"	30 cm	35 / 420
450088V1	● blu	23 G	19 mm	sottile	4"	10 cm	35 / 420
450086V1	● blu	23 G	19 mm	sottile	7,5"	19 cm	35 / 420
450161V1	● blu	23 G	19 mm	sottile	12"	30 cm	35 / 420

**Farfalla di SICUREZZA + holder per emocolture**

Codice	Colore	Misura ago	Lunghezza ago	Tipo di parete ago	Lunghezza tubo	Lunghezza tubo	Inner / Outer [Qtà.]
450182	● verde	21 G	19 mm	sottile	7,5"	19 cm	24 / 240
450183	● blu	23 G	19 mm	sottile	7,5"	19 cm	24 / 240
450184	● verde	21 G	19 mm	sottile	12"	30 cm	24 / 240
450185	● blu	23 G	19 mm	sottile	12"	30 cm	24 / 240

**VACUETTE® EVOPROTECT Set di SICUREZZA per prelievo di sangue/infusione**

Codice	Colore	Misura ago	Lunghezza ago	Tipo di parete ago	Lunghezza tubo	Lunghezza tubo	Inner / Outer [Qtà.]
450120	● verde	21 G	19 mm	extra sottile	7,5"	19 cm	60 / 1.080
450121	● blu	23 G	19 mm	extra sottile	7,5"	19 cm	60 / 1.080

**VACUETTE® EVOPROTECT Set di SICUREZZA per il prelievo di sangue + adattatore Luer**

Codice	Colore	Misura ago	Lunghezza ago	Tipo di parete ago	Lunghezza tubo	Lunghezza tubo	Inner / Outer [Qtà.]
450127	● verde	21 G	19 mm	extra sottile	7,5"	19 cm	60 / 1.080
450128	● verde	21 G	19 mm	extra sottile	12"	30 cm	60 / 1.080
450129	● blu	23 G	19 mm	extra sottile	7,5"	19 cm	60 / 1.080
450130	● blu	23 G	19 mm	extra sottile	23"	30 cm	60 / 1.080
450132	● arancio	25 G	19 mm	sottile	12"	30 cm	60 / 1.080

**VACUETTE® EVOPROTECT Set di SICUREZZA per il prelievo di sangue + holder**

Codice	Colore	Misura ago	Lunghezza ago	Tipo di parete ago	Lunghezza tubo	Lunghezza tubo	Inner / Outer [Qtà.]
450122	● verde	21 G	19 mm	extra sottile	7,5"	19 cm	30 / 540
450123	● verde	21 G	19 mm	extra sottile	12"	30 cm	30 / 540
450125	● blu	23 G	19 mm	extra sottile	7,5"	19 cm	30 / 540
450126	● blu	23 G	19 mm	extra sottile	12"	30 cm	30 / 540

# making a difference

[www.gbo.com](http://www.gbo.com)

**GREINER BIO-ONE GMBH**  
KREMSMÜNSTER, AUSTRIA

**PHONE** +43 7583 6791-0  
**FAX** +43 7583 6318  
**E-MAIL** [office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)



**GREINER BIO-ONE IS A GLOBAL PLAYER.**  
FIND THE CONTACT DETAILS OF YOUR  
LOCAL PARTNER ON OUR WEBSITE.



This product information is addressed exclusively to healthcare professionals.  
Devices of Greiner Bio-One are to be used by properly trained healthcare professionals only in accordance with the relevant Instructions for Use (IFU). For a listing of indications, contraindications, precautions and warnings, please refer to the Instructions for Use which accompanies each product. For more information contact your local Greiner Bio-One sales representative or visit our website.

All information is provided without guarantee despite careful processing. Any liability, warranty or guarantee of Greiner Bio-One GmbH is excluded. All rights, errors and changes are reserved. If not stated otherwise, Greiner Bio-One GmbH has all copyrights and/or other (user-)rights in this documents, in particular to signs such as the mentioned (word-picture-)brands and logos. Any use, duplication or any other use of the rights of Greiner Bio-One GmbH is expressly prohibited.  
**Media owner:** Greiner Bio-One GmbH / **Manufacturer:** [Samson Druck GmbH / 5581 St. Margarethen]

980151 it [rev.05 09.2024]

  
**greiner**  
BIO-ONE