



Divan d'examen électrique

Gamme 326

326 08T


greiner
BIO-ONE




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Divan d'examen à hauteur variable électrique mixte, 3 parties
- Commande : Pédale
- Tête et jambière réglables par vérins à gaz
- Sellerie tendue plate de bonne densité 30kg/cm², non-feu classée M1, épaisseur 8cm
- Equipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen côté pied
- Piètement acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard

DIMENSIONS

- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 57 à 87cm
- Capacité de charge : 150kg en dynamique

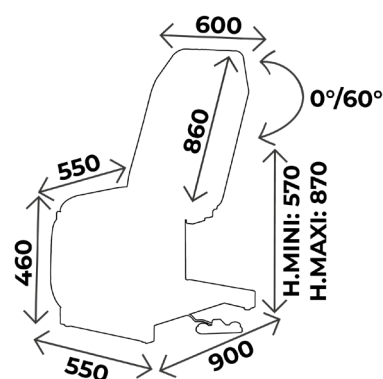

Vous aimerez aussi :

Réf. **326 09T** : Idem 326 08T mais largeur 70cm



À SAVOIR

- ✓ Garantie : 5 ans (1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



ACC 997
Support roulettes escamotables
diam. 50mm
pour 326 électrique, 3 parties



ACC 990
Jeu de 4 roulettes à frein
diam. 125mm



ACC 76B
Etau unitaire diam. 14mm




ACC 76
Paire d'étaux pour fixation
gouttières et étriers diam. 14mm



ACC 76C
Etau unitaire
pour tige porte-sérum diam. 16mm



ACC 32012
Tige porte-sérum diam. 16mm
2 crochets plastiques, sans étau

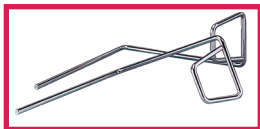

ACC 105
Jeu d'étriers inox standard
diam. 14mm, sans étau



ACC 964
Jeu de repose jambes noir,
sur rotule mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étau



SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose
jambes (ACC964), l'unité




ACC 514-UNIVERSE
Protection plastique transparent
universelle



ACC 110POLY
Gouttière prise de sang
polyuréthane avec ferrure
Sans étau, l'unité



ACC 110
Gouttière prise de sang
Avec ferrure, sans étau, l'unité

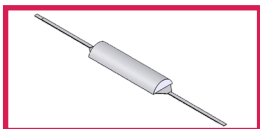

ACC 32660
Tête 1/2 Lune largeur 60cm



ACC TETERGO
Tête ergonomique amovible



ACC 832
Trou visage avec bouchon



ACC BARRILIT326B
Paire de barrières de lit
escamotables
pour 326 mixte

ACC 32614
Tête électrique

ACC 32615
Jambière
électrique

ZOOM
326 08T
avec accessoires

ACC 105
Jeu d'étriers inox standard
diam. 14mm



ACC 76
Paire d'étau diam. 14mm



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 5 ans
- Sellerie : 1 an