



*Photo non contractuelle - modèle sur socle*

*Tabouret*  
**Gamme 40**  
**4001CHR**



Ref GBO : CA4001CHR16

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz chromée
- Commande manuelle sous l'assise
- Assise ronde diam. 35cm, sellerie non feu classée M1, couture apparente, épaisseur 8cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied chromé 5 branches, empattement diam. 55cm

## DIMENSIONS

- Hauteur variable de 51 à 71cm
- Capacité de charge : 130kg

### Vous aimerez aussi :

Réf. **4003CHR** : Idem 4001CHR mais sur patins, hauteur variable de 47 à 67cm



### À SAVOIR



Garantie : 2 ans  
(1 an pour la sellerie)

## ACCESSOIRES



**ACC 10**  
Dossier pour gamme  
PRISCA, 120, 30 et 40



**ACC 14**  
Commande au pied



**ACC 15**  
Repose pieds




**ACC 16 (OPTION INCLUSE)**  
Pied sur socle chromé  
diam. 38cm  
(Enlève 1cm à la hauteur)



**ACCROULETTE-02**  
5 roulettes simple galet  
diam. 50mm



**ACCROULETTE-03**  
5 roulettes double galet sol dur  
diam. 50mm

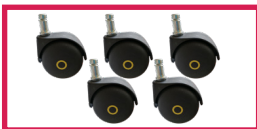

**ACCROULETTE-04**  
5 roulettes antistatiques  
diam. 50mm



**ACC 964**  
Jeu de repose jambes noir,  
sur rotule mousse polyuréthane,  
diam. 14mm, sans étai

**HH/HB**  
Hauteur haute ou hauteur basse

**4001CHR+ACC10**





# GUIDE D'ENTRETIEN

## ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

## GARANTIE

- 2 ans
- Sellerie : 1 an