



Photo non contractuelle - modèle sans jambièr

Fauteuil de prélèvement hydraulique

Gamme 512

512 66T

CARINA
Medical



CE
ISO 9001
ISO 13485

Ref GB0 : CA51266TSJ

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil de prélèvement à hauteur variable hydraulique pivotant à 360° (possibilité de bloquer la rotation), 2 parties
- Dossier réglable par vérins à gaz
- Position de Trendelenburg
- Sellerie en forme ergonomique de bonne densité 35kg/cm², non-feu classée M1, épaisseur 8cm
- Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
- Pied sur socle chromé

DIMENSIONS

- Largeur 55cm
- Hauteur variable de 52cm à 72cm
- Capacité de charge : 130kg en dynamique

À NOTER

Tous nos fauteuils peuvent être mis en **position allongée**

Vous aimerez aussi :

Réf. **512 14T** : Idem 512 66T mais sans sellerie ergonomique



À SAVOIR



Garantie : 2 ans
(1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES




ACC 537
Jeu d'étaux diam. 14mm
pour gouttières et étriers
pour toutes gammes sauf LUVIA



ACC 535
Jeu d'étaux double diam. 14mm
et 16mm pour gouttière + tige
porte-sérum

ACC 516
Option commande simultanée
Dossier/jambière

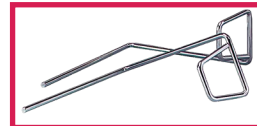

ACC 105
Jeu d'étriers inox standard
diam. 14mm, sans étau



ACC 964
Jeu de repose jambes noir,
sur rotule mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étau



SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose
jambes (ACC964), l'unité



ACC 514-GOUT
Protection gouttière en plastique
transparent, l'unité




ACC 514-ASSISE
Protection plastique assise



ACC 514-JAMBIÈRE
Protection plastique pour
jambière



ACC 517-512
Protection plastique pour dossier

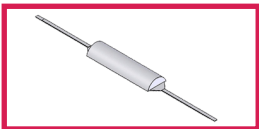

ACC 54005
Tête 1/2 lune largeur 55cm
revêtement non feu M1



ACC 910-PLAT02
Plateau inox support 340x340
avec étau

ACC 910-PLAT04
Plateau plastique
support 350x270 avec étau



ACC 113U
Jeu de poignées de maintien
latérales, sans étau prêt à fixer
sur fauteuil



ACC 113U-105
Jeu de poignées de maintien
latérales, avec étaux pour
adapter une paire d'étriers
prêt à fixer sur fauteuil



ACC 125
Porte rouleau
adaptable tous modèles



ACC 32012
Tige porte-sérum inox diam.
16mm, 2 crochets plastiques,
sans étau



ACC 32014
Tige porte-sérum inox diam.
16mm, 2 crochets inox,
sans étau



ACC TETERGO
Tête ergonomique amovible



ACC 110
Gouttière prise de sang
Avec ferrure, sans étau, l'unité



ACC 110POLY
Gouttière prise de sang
polyuréthane avec ferrure
Sans étau, l'unité



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an