



Fauteuil hémodialyse électrique

Gamme 945

945T


greiner
BIO-ONE



CE
ISO 9001
ISO 13485


Réf GBO : CA945

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil hémodialyse à hauteur variable électrique, 3 parties
- Commande : Télécommande manuelle multifonctions
- Dossier et jambièrè réglables par vérins électriques
- Position de Trendelenburg
- Sellerie mousse Bultex, épaisseur 8cm
- Equipé d'une paire de gouttières réglables en toutes positions par systèmes sécurisés et indexables, d'une tige porte-sérum 2 crochets plastique
- Piètemènt mécano-soudé, toutes les articulations sont montées sur des bagues bronzes, châssis composé d'un vérin électrique
- Piètemènt acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 4 roulettes double galets à frein diam. 50mm

DIMENSIONS

- Largeur 55cm
- Hauteur variable de 55 à 90cm
- Capacité de charge : 130kg en dynamique

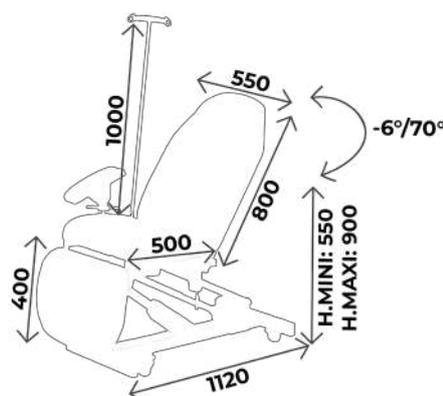

À SAVOIR

- ✓ Garantie : 5 ans (1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



ACC 537

Jeu d'étaux diam. 14mm pour gouttières et étriers pour toutes gammes sauf LUVIA



ACC 964

Jeu de repose jambes noir, sur rotule mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étau



ACC 514-GOUT

Protection gouttière en plastique transparent, l'unité



ACC 514-JAMBIÈRE

Protection plastique pour jambière



ACC 54005

Tête à 1/2 lune largeur 55cm revêtement non feu M1



ACC 910-PLAT04

Plateau plastique support 350x270 avec étau



ACC 113U-105

Jeu de poignées de maintien latérales, avec étaux pour adapter une paire d'étriers prêt à fixer sur fauteuil



ACC 32012

Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets plastiques, sans étau



ACC 110POLY

Gouttière prise de sang polyuréthane avec ferrure Sans étau, l'unité



ACC 105

Jeu d'étriers inox standard diam. 14mm, sans étau



SLFEMIREPOSE

Housse prélude pour repose jambes (ACC964), l'unité



ACC 514-ASSISE

Protection plastique assise



ACC 517-512

Protection plastique pour dossier



ACC 910-PLAT02

Plateau inox support 340x340 avec étau



ACC 113U

Jeu de poignées de maintien latérales, sans étau prêt à fixer sur fauteuil



ACC TETERGO

Tête ergonomique amovible



ACC 32014

Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets inox, sans étau



ACC 125

Porte rouleau adaptable tous modèles



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 5 ans
- Sellerie : 1 an