



*Fauteuil de prélèvement hauteur fixe*

**Gamme LUVIA**

**LUVIA78T**

  
**greiner**  
BIO-ONE



**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485


Réf GBO : CALUVIA

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil de prélèvement à hauteur fixe 51cm, 3 parties
- Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
- La jambière peut être mise en position verticale
- Position de Trendelenburg
- Sellerie en forme ergonomique de bonne densité 35kg/cm<sup>2</sup>, non-feu classée M1, épaisseur 7cm. Spécialement développée pour un confort optimum du patient
- Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
- Protection plastique sur assise et jambière en standard
- Pied sur socle chromé

## DIMENSIONS

- Largeur 55cm
- Hauteur 51cm
- Capacité de charge : 130kg

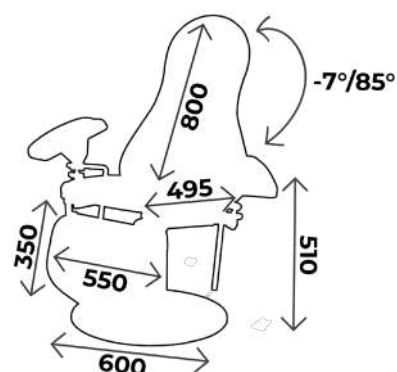

### À NOTER

Tous nos fauteuils peuvent être mis en **position allongée**



### À SAVOIR

✓ Garantie : 2 ans  
(1 an pour la sellerie)

**Vous aimerez aussi :**

Réf. **LUVIA78TSJ** : Idem LUVIA78T mais sans jambière


## ACCESSOIRES



**ACC 537**  
Jeu d'étaux diam. 14mm  
pour gouttières



**ACC 537LUVIA**  
Jeu d'étaux diam. 14mm  
pour étriers pour gamme LUVIA

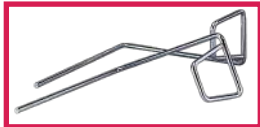

**ACC 105**  
Jeu d'étriers inox standard  
diam. 14mm, sans étai



**ACC 964**  
Jeu de repose jambes noir,  
sur rotule mousse polyuréthane,  
diam. 14mm, sans étai



**SLFEMIREPOSE**  
Housse prélude pour repose  
jambes (ACC964), l'unité



**ACC 514-GOUT**  
Protection gouttière en plastique  
transparent, l'unité



**ACC514-LUVI-ASS**  
Protection plastique assise



**ACC514-LUVI-JAM**  
Protection plastique pour  
jambière




**ACC514-LUVI-DOS**  
Protection plastique pour dossier



**ACC 54005**  
Tête 1/2 Lune largeur 55cm  
revêtement non feu M1



**ACC 910-PLAT02**  
Plateau inox support 340x340  
avec étai

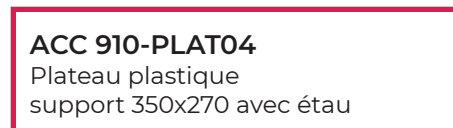

**ACC 910-PLAT04**  
Plateau plastique  
support 350x270 avec étai



**ACC 113U**  
Jeu de poignées de maintien  
latérales, sans étai prêt à fixer  
sur fauteuil



**ACC 113U-105**  
Jeu de poignées de maintien  
latérales, avec étaux pour  
adapter une paire d'étriers  
prêt à fixer sur fauteuil



**ACC 535**  
Jeu d'étaux double diam. 14mm  
et 16mm pour gouttière + tige  
porte-sérum



**ACC 32012**  
Tige porte-sérum inox diam.  
16mm, 2 crochets plastiques,  
sans étai



**ACC 32014**  
Tige porte-sérum inox diam.  
16mm, 2 crochets inox,  
sans étai



**ACC TETERGO-LUV**  
Tête ergonomique amovible  
pour gamme LUVIA



**ACC 110**  
Gouttière prise de sang  
Avec ferrure, sans étai, l'unité  
\* Disponible en polyuréthane avec  
option ACC 110POLY



**ACC 125**  
Porte rouleau  
adaptable tous modèles



# GUIDE D'ENTRETIEN

## ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

## GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an