

Armoire positive 5°C ± 2°C, 856 litres, porte pleine



Informations produit

- › Appareil qualifiable selon FD X15-140, conforme "Bonne Pratique de Laboratoire".
- › Refroidissement ventilé +5°C ± 2°C.
- › Température réglable de +2°C à +16°C.
- › Dégivrage et évaporation des condensats automatique par gaz chaud.
- › Groupe frigorifique compact placé au dessus de la cuve pour un volume de chargement optimal.
- › Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion.
- › Cuve en acier inox AISI 304 avec angles arrondis.
- › Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 83mm (injectée sans HFC).
- › Evacuation des eaux de nettoyage en fond de cuve.
- › Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible.
- › Arrêt de ventilation à l'ouverture de porte.
- › Rappel de porte automatique.
- › Soupape de décompression pour faciliter la réouverture de la porte.
- › Bandeau relevable pour un accès technique par l'avant, maintenance aisée et nettoyage facilité.
- › Equipée de 4 roulettes Ø100 mm dont 2 avec freins.
- › Passage de cuve Ø 15mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC (Gestion Température Centralisée) PT100 ou numérique.
- › Passage de cuve Ø 30mm pour la qualification sur site, positionné sur le coté à 1/3 du haut.
- › Régulation électronique avec affichage & réglage par pas de 0,1 °C.
- › Verrouillage du clavier sécurisé par code PIN.
- › Alarme température haute/basse visuelle et sonore (seuils réglables).
- › Alarme ouverture de porte visuelle et sonore.
- › Alarme coupure de courant visuelle et sonore (via batterie avec autonomie 72 heures).
- › Contact libre de potentiel (NO/NF) pour le raccordement à un système de contrôle à distance.
- › Sauvegarde des 3 dernières alarmes de température avec indication de la date de l'heure et de la durée.

Avantages



+ Cartographie de contrôle

Afin de garantir les performances de stabilité et d'homogénéité de la température d'air à l'intérieur de l'enceinte, tous les appareils sont cartographiés suivant la procédure FDX15-140 à l'aide de 9 capteurs de températures à réaction rapide.



+ Régulation électronique COMFORT+

La commande électronique Comfort+ permet un réglage précis de la température au 1/10 de degré et embarque de nombreuses fonctionnalités pour garantir le plus haut niveau de sécurité. (voir page info complète)



+ Performance du froid

L'évaporateur batterie couplé à une double ventilation axiale, garantissent une production de froid puissante et homogène. Les temps de récupération de température sont considérablement réduits pour garantir un stockage sûr de vos produits aux températures de consignes désirées et ce malgré des ouvertures de porte répétées.




+ Passage de cuve 15 mm

Pour faciliter la mise en place de capteurs et sondes de températures filaires, les appareils sont équipés d'origine d'un passage de cuve de diamètre 15 mm.



+ Relais d'alarme

Les enceintes sont équipés d'un contact sec sans potentiel permettant de relayer les états d'alarmes (panne de courant et alarmes de température) vers un système d'avertissement externe.

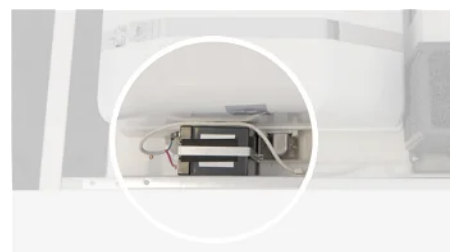

+ Réserve de marche 72 heures

En cas de panne de courant une batterie alimente l'électronique de l'enceinte. La variation de température continue ainsi d'être enregistrée pendant 72 heures et maintient alimenté le système d'avertisseur d'alarme sonore et visuelle.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|--|
| Volume brut (L) | 856 |
| Volume utile (L) | 744 |
| Homogénéité de la température | 5°C ± 2°C |
| Température (°C) | +2°C à +16°C |
| Hygrométrie | 65-75 % |
| Refroidissement | ventilé |
| Dégivrage | automatique par gaz chaud |
| Évaporateur | batterie |
| Condenseur | batterie fil ventilé (avec filtre) |
| Carrosserie | epoxy blanc |
| Cuve | inox |
| Épaisseur d'isolation | 83 |
| Porte | epoxy blanc |
| Inversion sens d'ouverture porte | oui |
| Rappel de porte automatique | oui |
| Serrure | Oui |
| Roulettes | 2 pivotantes avec frein + 2 fixes Ø 100 mm |
| Fluide | R-290 |
| Charge de gaz (g) | 99 |
| Niveau sonore dB(A) | 58 |
| Contact sec | oui |
| Thermostat de sécurité anti-congélation | non |

COMMANDE

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Régulation | électronique |
| Affichage température | digital 0,1°C |
| Alarme température | Visuelle et sonore |
| Alarme ouverture de porte | visuelle et sonore |
| Fonction HACCP | oui |
| Verrouillage de la commande | code PIN |

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

| | |
|--|-----------|
| Classe climatique | 5 (+40°C) |
| Consommation énergétique (kWh/24h) | 1,65 |
| Consommation énergétique annuelle (kWh/an) | 603 |

ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|----------------------|
| Grille acier plastifié (nb) | 4 |
| Dimensions grilles (LxP) (mm) | 600x800 |
| Nombre de niveaux max. | 25 (espacement 54mm) |
| Hauteur de réglage (mm) | 27 |
| Charge max admissible sur grille (kg) | 60 |
| Tiroirs aluminium télescopiques (en accessoirés) (nb max) | 13 (H 55mm) |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------------|--------------|
| Dimensions (LxPxH) (mm) | 790x980x2160 |
| Hauteur sans pieds (mm) | 2000 |
| Cuve (LxPxH) (mm) | 620x850x1550 |
| Poids net (kg) | 147 |

ALIMENTATION


| | |
|------------------------------------|-------------|
| Tension (V) | 230V (mono) |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Intensité (A) | 2 |
| Puissance électrique raccordée (W) | 250 |
| Dégagement calorifique (Wh/h) | 119 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 835x1025x2180 |
| Poids brut (kg) | 178 |

¹appareil tête de série qualifié selon FD X15-140 - en température d'air pour une ambiance 22°C.
Limite de responsabilité : ni le fabricant ni le vendeur ne peuvent être tenus responsables des dommages occasionnés par un dysfonctionnement de l'appareil, si celui-ci n'est pas raccordé à un système de surveillance à distance ou si ce système est inopérant.

Schémas techniques

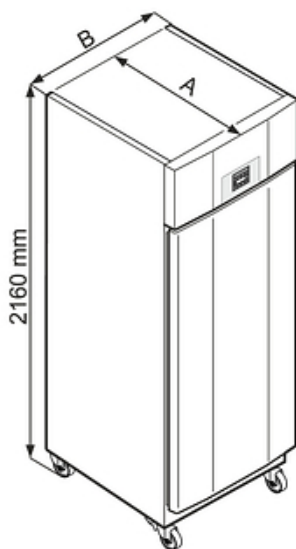

LKPV 84 A = 980 mm, B = 790 mm

Accessoires et options

Accessoires

7113643 Grille acier plastifié (lxp) 600x800 mm (prévoir 1 jeu de glissières)

9005089 Glissière inox droite en "U" pour LKPV 84

9005077 Glissière inox gauche en "U" pour LKPV 84

306507E Tiroir aluminium (fond plein) façade plexi - dimensions utiles (lxpxh) 576x700x550 mm

9590659 Pédale ouverture de porte - modèles 1 porte COMFORT

EJ 32 Enregistreur de température mobile (seul)

EJ 32 IN Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)

Options

OP12B Inversion du sens d'ouverture de porte

OP14I Enregistreur de température sur disque 7j. - sonde PT 1000 étalonnée - intégré en façade

OP18C Calibrage de l'enceinte à +4°C ±2°C

OP18B Calibrage de l'enceinte à +6°C ±2°C

OP19 Calibrage de l'enceinte à +2°C ±2°C

OP75 Montage de 2 prises de courant 230V mono puissance max 690W / 3A total dans la cuve