



Divan d'examen électrique
Gamme OVALIA Version 2
OV2-08-125


greiner
BIO-ONE



CE
ISO 9001
ISO 13485


Ref GBO : OV208125

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Divan d'examen à hauteur variable électrique, 2 parties
- Commande : Télécommande manuelle multifonctions
- Réglage de la tête en toutes positions par vérin à gaz
- Position Déclive/Proclive en standard
- Sellerie tendue plate de bonne densité 24kg/cm², non-feu classée M1, épaisseur 5cm
- Châssis composé de 2 colonnes télescopiques pour une grande stabilité du divan
- Equipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen côté tête
- Piètement carterisé pour une hygiène optimale, coloris gris clair (RAL 7035)
- Sur 4 roulettes diam. 125mm avec freins

DIMENSIONS

- Largeur 80cm
- Hauteur variable de 48 à 88cm
- Capacité de charge : 200kg en dynamique

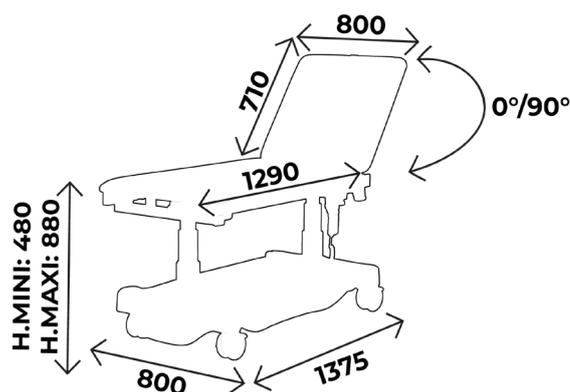

Vous aimerez aussi :

Réf. **OV2-05-125** : Idem OV2-08-125 mais largeur 70cm

Réf. **OV2-06-125** : Idem OV2-08-125 mais largeur 70cm commande par pédale multifonctions

Réf. **OV2-09-125** : Idem OV2-08-125 mais commande par pédale multifonctions



À SAVOIR



Garantie : 5 ans
(1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



RL-150
4 roulettes diam. 150mm
Freinage centralisé



ACC 76-OVALIA-80
Jeu d'étaux
Pour divan largeur 80cm



ACC 110POLY
Gouttière prise de sang
Polyuréthane avec ferrure
Sans étau, l'unité



ACC 110
Gouttière prise de sang
Avec ferrure, sans étau, l'unité



ACC 964
Jeu de repose jambes noir,
sur rotule mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étau



ACC 105
Jeu d'étriers inox standard
diam. 14mm, sans étau



SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose
jambes (ACC964), l'unité



ACC 514-UNIVERSE
Protection plastique transparent
universelle



ACC 32012
Tige porte-sérum diam. 16mm
2 crochets plastiques, sans étau



ACC 76C
Etau unitaire
pour tige porte-sérum diam. 16mm



ACC 832
Trou visage avec bouchon



ACC 54003
Tête 1/2 Lune largeur 80cm
Revêtement non feu M1



ACC OVALIA06
Télécommande manuelle OVALIA
+ Cordon Y (double commande)



ACC OVALIA05
Pédale multifonctions OVALIA
+ Cordon Y (double commande)



ACC OVALIA02
Paire rails inox 25x10
long. 1500mm
Pour OVALIA 2 parties



ACC BATTERIE01
Batterie autonomie de 20 cycles
(1 cycle = une montée/ descente
+ une montée/ descente
de dossier)




ACC BARRILITOV08
Paire de barrières escamotables
Pour divan largeur 80cm



ACC TETERGO
Tête ergonomique amovible




ACC-CAPOT
Peinture capot
Autre que le gris standard (7035)
16 coloris disponibles

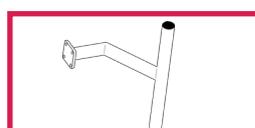

ACC FEMINA01
Support colposcope

ACC14

Vérin électrique
Pour OVALIA 2 parties uniquement

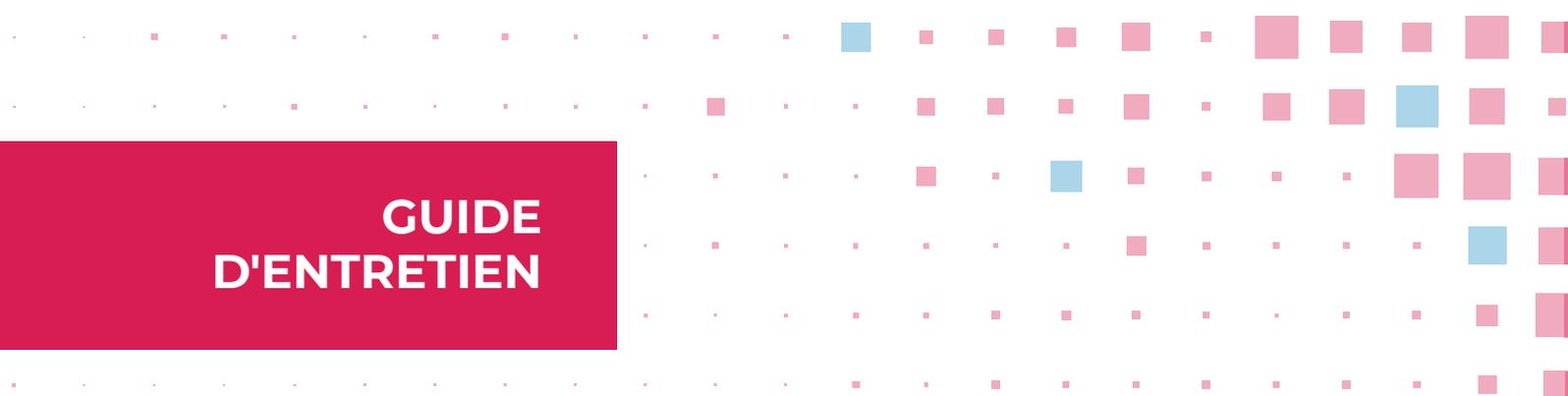

GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 5 ans
- Sellerie : 1 an