



Divan de pédiatrie
Gamme ECOMAX pédiatrique
PEDIADIVAN01


greiner
BIO-ONE




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Divan d'examen de pédiatrie à hauteur fixe, 2 parties
- Réglage du dossier en toutes positions par deux crémaillères indexables
- Sellerie tendue plate de bonne densité 24kg/cm², non-feu classée M2, épaisseur 6cm
- Equipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen : possibilité de le fixer côté pied ou côté tête
- Piètement acier peint époxy, coloris argent

DIMENSIONS

- Largeur 60cm
- Hauteur 80cm
- Capacité de charge : 150kg

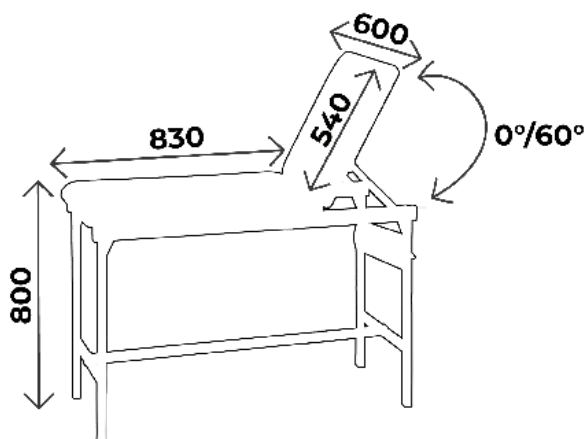

ACCESSOIRE



ACC 990
Jeu de 4 roulettes à frein
diam. 125mm

Vous aimerez aussi :

Réf. **PEDIADIVAN02** : Idem PEDIADIVAN01
mais réglage du dossier par vérin à gaz



À SAVOIR

- ✓ Livré démonté avec clé et notice d'assemblage
- ✓ Garantie : 2 ans
(1 an pour la sellerie)



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an