



UN RECUEIL D'URINE HYGIÉNIQUE ET SÉCURISÉ



IVD

POT URINE

avec canule de transfert intégrée


Le pot urine avec canule de transfert intégrée permet de recueillir et de transporter les échantillons d'urine en toute sécurité. Grâce à la canule intégrée, le transfert de l'échantillon du pot vers un tube sous vide devient une tâche aisée, rapide et hygiénique.

Le filetage optimisé du pot à urine facilite son ouverture et sa fermeture. De plus, une bride de stabilisation sécurise la fermeture du dispositif et empêche le vissage excessif.

- / Dispositif de transfert intégré pour réduire le risque de blessures par piqûre d'aiguille.
- / Disponible en vrac ou en cartons de plusieurs petits paquets - pour répondre aux différents besoins de distribution dans les établissements de santé.

NOUVELLE ÉTIQUETTE.

L'étiquette fait office de témoin d'intégrité de la stérilité et indique visuellement si le produit a été ouvert avant utilisation une fois déchirée.

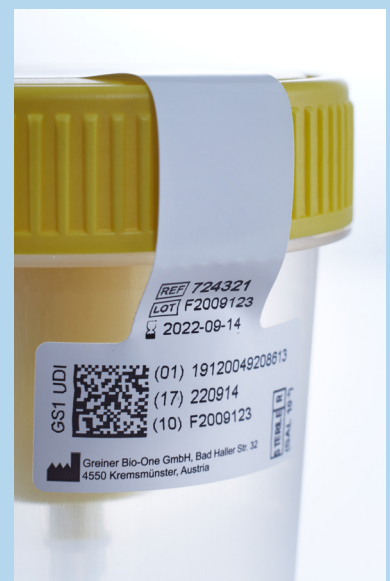

APERÇU PRODUIT

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU
DEMANDER UN ÉCHANTILLON, RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE WEB OU CONTACTEZ-NOUS.

Pot urine avec canule de transfert intégrée

Réf.	Volume	Type de bouchon	Couleur du bouchon	Stérile	Intérieur / Extérieur [Qté.]
724321	100 ml	Bouchon vissant	● jaune	stérile	- / 300
724322	100 ml	Bouchon vissant	● jaune	non stérile	- / 300
724325	100 ml	Bouchon vissant	● jaune	stérile	10 / 250

RECOMMANDATIONS DE MANIPULATION

Veillez suivre les instructions d'utilisation figurant sur notre site internet www.gbo.com.



1

Si vous souhaitez remplir plusieurs tubes, desserrez le couvercle d'un peu plus d'un quart de tour pour normaliser la pression à l'intérieur du pot.



2

Découpez l'étiquette de sécurité.



3

Insérez le tube et attendez qu'il soit complètement rempli. Retirez ensuite le tube.



4

Remplacez l'étiquette de sécurité dans sa position d'origine et resserrez le couvercle.