



VISUALIZACIÓN DE VENAS BAJO UNA NUEVA LUZ

CHRISTIE+

VEINVIEWER® Flex

Cada vez son más los pacientes con condiciones venosas difíciles que necesitan una solución urgente. VeinViewer® Flex es la solución para atender esas necesidades.

VeinViewer® Flex combina todos los avances recientes en la visualización de venas en un dispositivo portátil. VeinViewer® Flex ayuda a encontrar las venas con mayor rapidez, especialmente en el caso de pacientes con problemas, lo que facilita enormemente la punción. El dispositivo Flex ofrece una revolucionaria imagen HD en tiempo real que visualiza las trayectorias de las venas antes, durante y después de la punción. El dispositivo puede utilizarse para visualizar venas periféricas hasta 10 mm por debajo de la piel o patrones sanguíneos hasta 15 mm por debajo de la superficie cutánea.

- / Cambio rápido de batería, larga autonomía.
- / Fiable en la rutina diaria.
- / El robusto soporte en S se monta rápidamente.
- / Diseño ergonómico que facilita su uso.

ASSESS™ IMAGING SUITE.

Visualice las venas como nunca antes con ASSESS™ Imaging Suite. Este software sólo está disponible en los productos VeinViewer®. Una amplia variedad de modos permite una visualización óptima de las venas para cada paciente.

PARA UN MÁXIMO CONTROL:

- / Finos detalles para venas pequeñas
- / Captación de imágenes conforme a la HIPAA
- / Modo de color inverso
- / Ajuste de la ventana en tres tamaños diferentes
- / MaxBright para condiciones de luz variable
- / CathCompass™ para mejorar la toma de decisiones



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

PARA MÁS INFORMACIÓN Y/O SOLICITAR
MUESTRAS, VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
O PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS.

VeinViewer® Flex

Referencia	Descripción	Embalaje interior/ Exterior [uds.]
890001	Incluye 2 baterías de litio	-/1

VeinViewer® Accesorios

Referencia	Descripción	Embalaje interior/ Exterior [uds.]
890011	Estación de carga para la batería recargable de VeinViewer® Flex	-/1
890011A	Adaptador para la estación de carga de la batería recargable para VeinViewer® Flex	-/1
890010	Batería recargable de repuesto para VeinViewer® Flex y Vision 2	-/1

RECOMENDACIONES DE USO

Por favor, consulte las Instrucciones de Uso en www.gbo.com.



1

VeinViewer® Flex puede funcionar con batería o con la red eléctrica. Por lo tanto, no hay riesgo de tiempo de inactividad.




2

VeinViewer® Flex puede colocarse y manejarse fácilmente con una sola mano. Si necesita tener las dos manos libres para la punción, puede utilizar el soporte en S.



3

VeinViewer® Flex se coloca en paralelo a la zona de punción. Se puede identificar la posición de enfoque correcta por el hecho de que el texto en el borde de la imagen es claramente legible (aprox. 30 cm de distancia).

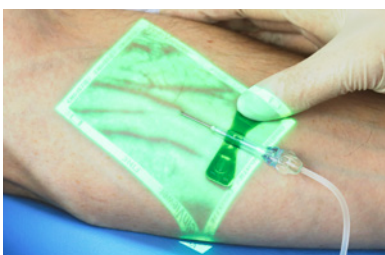

4

En el modo estándar (universal), se utiliza la tecnología de proyección HD y Df2. Esto proporciona una imagen precisa de los patrones sanguíneos superficiales en tiempo real.