

# greiner bio-one PRoMotion



キャンペーン期間: 2024年9月2日 ~ 2024年 **12月27日**



高精度分光光度計  
EzDrop 1000C P.2



サーマルサイクラー  
TurboCycler™ Lite P.3



サーマルサイクラー  
TurboCycler™ 2 P.3



マイクロ遠心機 5D P.4




卓上ミニ遠心機 P.4




Sapphire  
Pipettor  
マルチチャンネル P.6



2 ポジション  
キャップチューブ P.5

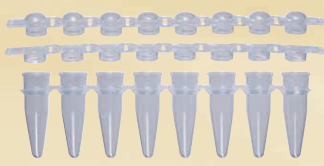

Sapphire  
PCR 8 連チューブ P.5

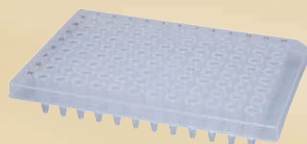

Sapphire  
PCR プレート P.5



回転ピペットスタンド  
UV ランプ付き P.7



リザーバー P.7

キャンペーンコード

**J0901**

ご注文方法: 専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。

# デュアルモード高精度分光光度計 EzDrop 1000C

- 2つの測定モード（マイクロボリュームモード/キュベットモード）
- 10個の測定アプリケーション搭載  
（DNA/RNA/タンパク質/細菌数の濃度測定、カインティック測定、ラベル化されたタンパク質などの測定）
- 1サンプルあたりの測定時間は3秒
- 測定できる波長が190～1000 nmと広範囲
- PCへの接続によりフレキシブルなデータ管理を実現


製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804001-C	EzDrop-1000C	¥1,749,000	¥1,330,000

マイクロボリュームモード (測定量1μl)

キュベットモード (測定環境下37～45℃)



LEDアシストライトにより溶液の滴下をサポート

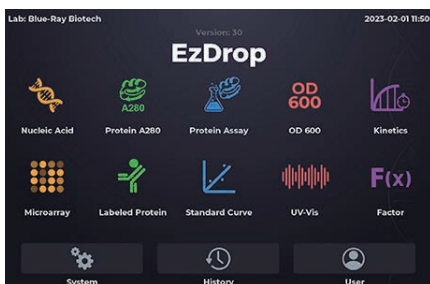

10個の測定アプリケーションを搭載。カスタマイズした測定も可能。  
ニトリルグローブなどのグローブ着用時も操作可能。


## ■ マイクロボリュームモード

最小サンプル量	1μl
経路長	0.5 mm/0.05 mm
光源	キセノンフラッシュランプ
検出タイプ	CMOS 2048エレメント
測定波長	190～1000 nm
波長の精度	±1.0 nm
スペクトル分解能	1.5 nm (FWHM Hg 253.7 nm)
吸光度の精度	0.0015 A (0.5 mm相当)、0.03A (1 cm相当)
吸光度の精度誤差	1.5% (300 nmで1.0吸光度の時)
吸光度測定範囲 (1 cm相当)	0.04～400 A
検出範囲	dsDNA: 2～20000 ng/μL BSA: 0.06～600 mg/mL
測定時間	3秒未満

## ■ キュベットモード

経路長	10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.125, 0.1 mm
吸光度測定範囲 (1 cm相当)	0.002～1.5 A
検出範囲	dsDNA: 0.3～75 ng/μL BSA: 0.003～2.25 mg/mL
攪拌	150～850 rpm (8段階)
温度コントロール	37～45℃±0.5℃ (石英キュベット)

石英  
キュベット  
付属

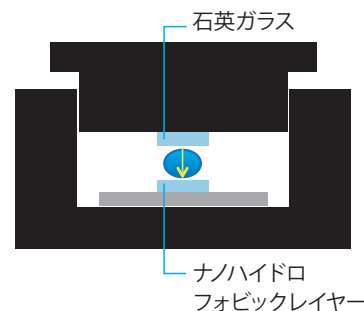

石英ガラス/疎水性コートにより  
ドロップを形成し、測定エラーを防ぐ

## ■ ソフトウェア

OS	Linux
PCソフトウェア要件	Windows 7, 10 (64bit)

## ■ 概要

ディスプレイ	7インチのカラータッチパネル (HDカラーディスプレイ)
接続	Type-AのUSBメモリー (1ポート、データ出力) Type-BのUSBポート (PC接続)
寸法	縦 206×横 166×高さ 333 mm
重さ	3.3 kg未満
グローブとの相性	研究用グローブすべて対応
内部メモリ	32GB
電源アダプター	インプットAC 100～240 V、50/60 Hz アウトプットDC 24 V、2.08 A
品質保証	CEマーク、UKCA

# サーマルサイクラー TurboCycler™ Lite

BLUE-RAY BIOTECH DEMO

キャンペーン価格 (税抜)


**¥418,000**

ラボ用グローブ  
装着でも楽々操作



## 簡単パネル操作 グラジエント機能搭載

- 5インチモノクロスクリーン
- 操作容易なキーパッド
- グラジエント機能付き
- 最大温度上昇速度 3.0°C/sec
- 2年保証

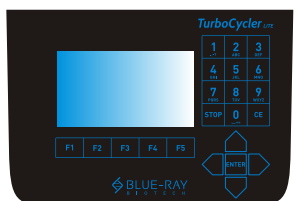

触れるだけで反応するキーパッド 1-24°Cのグラジエント温度設定幅

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804305	グラジエントターボサイクラー2 96ウェルタイプ	¥757,900	¥540,000
J804391	Wi-Fi アップグレードモジュール	¥36,040	¥0*
J804392	コンプレッションマット (10枚入り)	¥15,480	キャンペーン対象外
J804306	ターボサイクラーライト 96ウェルタイプ	¥553,850	¥418,000

\* グラジエントターボサイクラー2 (製品番号: J804305) を1台ご注文で本品1台が無償になります。ご希望の際は、専用注文書に数量をご記入ください。  
(グラジエントターボサイクラー2には標準添付していませんのでご注意ください。)

カタログNo.	J804306
ブロックタイプ/サンプル数	96-well, 0.2ml / 96
ブロック加熱技術	ペルチェ素子
ブロック温度設定範囲	4.0°C - 99.9°C
最大温度上昇速度	3.0°C/秒
最大温度下降速度	2.0°C/秒
温度制御	±0.3°C
温度均一性	±0.5°C
温度可能温度勾配	○ High/Low
温度グラジエント機能	○
温度グラジエント範囲	30-99°C

グラジエント温度設定幅	24°C
プログラム数	200
ユーザーホルダー数	50
パスワードプロテクション	あり
ディスプレイ	モノクロLCM
ヒートリッド	35°C - 120°C or オフ
ヒートリッド制御	±1.0 °C
オートスタート機能	○
外寸	高さ22.5cm 幅24.5cm 奥行41.5 cm
重量	9.5 kg
電源電圧	AC100-240V, 50/60 Hz, 500W

※仕様は予告なしに変更する場合がございます。

# サーマルサイクラー

## TurboCycler™ 2 ハイスペックモデル

BLUE-RAY BIOTECH DEMO

### リモートモニター可能 7インチ大型モニタータッチスクリーン搭載モデル

- 7インチカラータッチスクリーン、コンパクトデザイン
- Wi-Fi モジュールで、リモートモニター可能 (特別サービス)
- 高熱伝導性と温度均一性実現 最大温度上昇速度 5.5°C/秒
- オリジナルプログラムソフト “対話形式で簡単入力”
- USBによるプログラム移動及び保存可能
- 2年保証



使用方法は  
YouTubeで  
ご確認頂  
けます。



製品番号	製品名
J804305	グラジエントターボサイクラー2 96ウェルタイプ

## 5 ml チューブ用遠心機

# Greiner Micro Centrifuge 5

- 5 mlチューブ用遠心機
- 1.5 ml・2.0 mlチューブまたは5.0 mlチューブを各4本同時に遠心
- 付属のローターにより0.2 mlチューブが遠心可能
- 遠心時間、遠心スピードはボタンにより設定

スピード	5,500 rpm/1,690 ×g
収納サイズ	5.0mlチューブ 4本、1.5/2.0mlチューブ4本
回転時間	1～59秒もしくは1～99分
サイズ	19.4×22.9×12 cm (W×D×H)
電源	100V-230V、50/60Hz、45W



※ 真空採血管・微量採血管を遠心する場合のサイズは13mm×75mmになります。

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J842050-N	グライナー マイクロ遠心機5D	¥103,880	¥83,000



## グライナー 卓上ミニ遠心機

# Greiner Mini Centrifuge

- Klik-n-Lok™ ローター装着システム
- 0.2ml 8連チューブローター (4本掛け)、1.5/ 2.0 ml チューブ用ローター標準装備、各容量の遠心可能
- 蓋の開閉による操作でON/OFFのコントロール可能

最大回転数	6,000 rpm
最大遠心力	2,000 RCF (g)
サイズ (W×D×H)	11.4×15×11.4 cm
重量	1 kg
電源	100-240V、50/60Hz
収納サイズ	1.5/2.0ml チューブ×8本、0.2ml 8連チューブ×4本

### 標準付属品

PCR8連用ローター、チューブアダプター 0.5ml 8ヶ入り, 0.2ml 8ヶ入り

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J843050	グライナー 卓上ミニ遠心機	¥48,870	¥34,600




使用方法は  
YouTubeで  
ご確認頂け  
ます。



## Sapphire PCR 8連チューブ


- キャップはフラット型 (373250)、ドーム型 (373270) をご用意
- キャップは全てのSapphire 8連チューブとSapphire 96ウェルPCRプレートに使用可能
- フラット型はリアルタイムPCRに適しており、多くの一般的なサーマルサイクラーに使用できます。
- チューブ本体は整列包装されています。

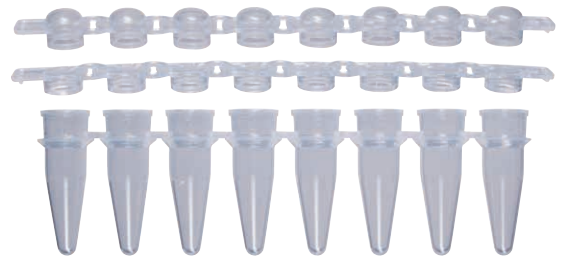

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装単位	入数	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
673210	Sapphire PCRチューブ 8連ストリップ ナチュラル (本体のみ)	200μl	ポリプロピレン (PP)	×	125×1袋	125本	¥20,500	¥8,580	¥68.6
373250	Sapphire PCRキャップ 8連ストリップ フラットトップ ナチュラル (フタのみ)		ポリプロピレン (PP)	×	125×1袋	125本	¥7,320	¥3,590	¥28.7
373270	Sapphire PCRキャップ 8連ストリップ ラウンドトップ ナチュラル (フタのみ)		ポリプロピレン (PP)	×	125×1袋	125本	¥5,840	¥2,450	¥19.6

## Sapphire PCRプレート

- 熱伝導に優れる薄型ウェル壁面
- 8連チューブの蓋で密閉可能
- 主にご使用頂けるサーマルサイクラーは下記の通りです  
 652250 : PRISM 7300,7500,7700 (Applied Biosystems)  
 652260 : PRISM 7300,7500,7700,7900HT, QuantStudio™ (Applied Biosystems)  
 652270 : iCycler, MyiQ™ (Bio-Rad)  
 652290 : PRISM 7700 (Applied Biosystems), iCycler, MyiQ™, iQ™5 (Bio-Rad)


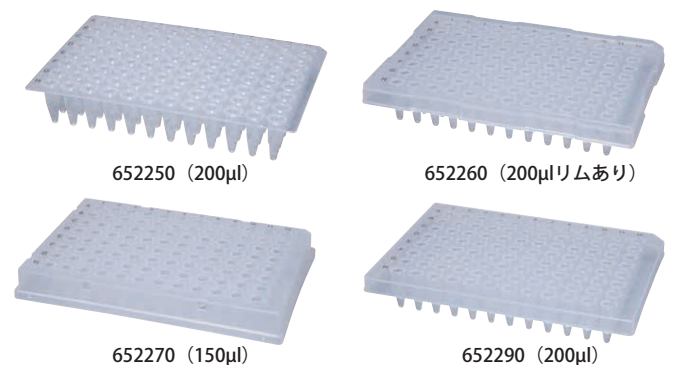


製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装単位	入数	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
652250	Sapphire PCRプレート 96ウェル スカートなし フラットトップ ユニバーサル ナチュラル	200μl	ポリプロピレン (PP)	×	10×10袋	100本	¥110,140	¥48,500	¥485.0
652260	Sapphire PCRプレート 96ウェル ハーフスカート ABI用 ナチュラル	200μl	ポリプロピレン (PP)	×	10×10袋	100本	¥110,140	¥43,000	¥430.0
652270	Sapphire PCRプレート 96ウェル フルスカート ナチュラル	150μl	ポリプロピレン (PP)	×	10×10袋	100本	¥110,140	¥56,000	¥560.0
652290	Sapphire PCRプレート 96ウェル ハーフスカート ABI用 ナチュラル	200μl	ポリプロピレン (PP)	×	10×10袋	100本	¥110,140	¥34,000	¥340.0

## 2ポジションキャップチューブ

- 大腸菌などの細菌の培養に使用

Free of detectable DNase, RNase, human DNA non-pyrogenic

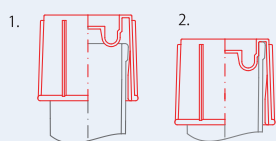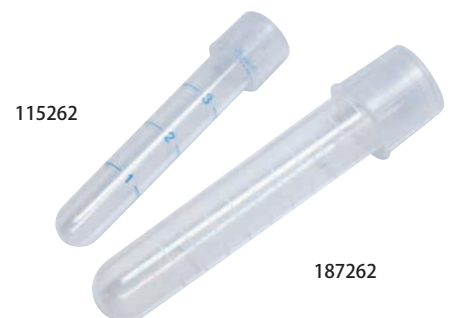

### ベントキャップの2つのポジション

1. キャップをかぶせて使用します。チューブ内部の均質なガス交換が可能です。
2. キャップを深く押し込んで使用します。チューブは気密状態になります。

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装単位	入数	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
115262	2ポジションキャップチューブ 5ml	5ml	PP (チューブ) / LDPE (フタ)	○	25×80袋	2000	¥128,000	¥51,200	¥25.6
187262	2ポジションキャップチューブ 14ml 25x40袋	14ml	PP (チューブ) / LDPE (フタ)	○	25×40袋	1000	¥94,000	¥41,360	¥41.4

# Sapphire Pipettor マルチチャンネル

デモOK

本体フルオートクレーブ対応

3年保証


ノズル、シールガイドOリングセット除く

## 超軽量・フルオートクレーブ対応モデル

- 独自のノズルデザインとピストン駆動部に特殊機構を設けており、マルチチャンネルでのチップ装着バラツキを最小限に押さえます。
- ピペッター本体のどの角度からもチップイジェクトできます。
- 本体オートクレーブ可能です。
- ボディーはUV耐性です。
- 一目で分かる容量表示。
- 3種類のイジェクターポジション

### アプリケーション

PCR, DNA sequencing  
molecular biology, immunology

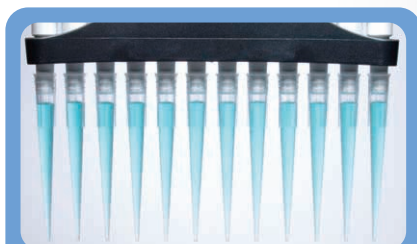

独自のノズルデザインでチップ装着バラツキを最小限に押さえます。



### 3種類のイジェクター

ポジション設定可能、右利き、左利きどちらの方にも対応



### 見やすいカウンター設計



### ラボ作業管理に便利



独自のデザインでチップ装着を限りなく容易にします。




スパーサーを使う事により、更にチップイジェクター時の力を軽減します。  
(89000810、89001210の機種限定、スパーサーは標準装備)

## Sapphire Pipettor

	製品番号	製品名/規格	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)	容量範囲(μL)	容量(μL)	Systematic error		Random error		プッシュボタン
							(μL)	(%)	(μL)	(%)	
8チャンネル	89000810	Sapphire Pipette 8CH 0.5-10μL	¥91,300	¥58,000	0.5-10	0.5	± 0.09	± 17.6%	≤ 0.04	≤ 8.8%	●
	89000820	Sapphire Pipette 8CH 2-20μL	¥91,300	¥58,000	2-20	5	± 0.22	± 4.40%	≤ 0.11	≤ 2.20%	●
						10	± 0.22	± 2.2%	≤ 0.11	≤ 1.1%	●
	89008200	Sapphire Pipette 8CH 20-200μL	¥91,300	¥58,000	20-200	2	± 0.11	± 5.5%	≤ 0.09	≤ 4.4%	●
10						± 0.22	± 2.20%	≤ 0.11	≤ 1.10%	●	
89008300	Sapphire Pipette 8CH 20-300μL	¥91,300	¥58,000	20-300	20	± 0.40	± 2.0%	≤ 0.17	≤ 0.8%	●	
					89001210	Sapphire Pipette 12CH 0.5-10μL	¥104,000	¥66,000	0.5-10	20	± 0.55
12チャンネル	89001220	Sapphire Pipette 12CH 2-20μL	¥104,000	¥66,000	2-20	100	± 1.10	± 1.10%	≤ 0.44	≤ 0.44%	●
						200	± 2.20	± 1.1%	≤ 0.55	≤ 0.3%	●
	89012200	Sapphire Pipette 12CH 20-200μL	¥104,000	¥66,000	20-200	20	± 1.10	± 5.5%	≤ 0.39	≤ 1.93%	●
						150	± 1.65	± 1.10%	≤ 0.66	≤ 0.44%	●
89012300	Sapphire Pipette 12CH 20-300μL	¥104,000	¥66,000	20-300	300	± 3.30	± 1.1%	≤ 1.10	≤ 0.37%	●	

## リザーバー

- 10mlサイズは8チャンネル専用
- 試薬ロスの少ないV底形状
- 試薬回収用注ぎ口あり
- 見やすい目盛り表示あり
- DNase, RNase, Pyrogen free

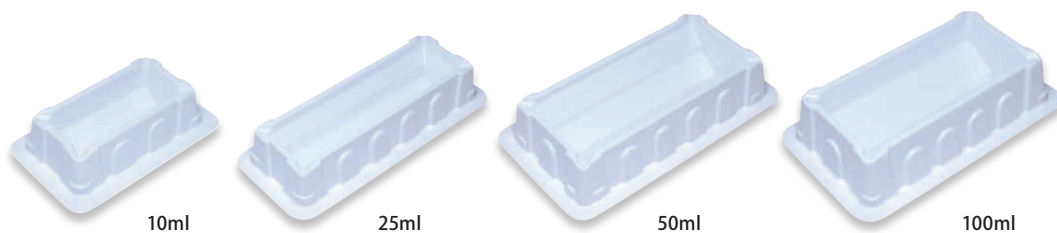

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装単位	入数	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
J908305-SIN	試薬リザーバー 10ml (8チャンネルピペット専用)	10ml	PS	○	個別包装	100	¥22,370	¥12,300	¥123.0
J908305	試薬リザーバー 10ml (8チャンネルピペット専用)	10ml	PS	○	5枚包装	200	¥28,940	¥15,900	¥79.5
J909305-SIN	試薬リザーバー 25ml	25ml	PS	○	個別包装	100	¥22,370	¥12,300	¥123.0
J909305	試薬リザーバー 25ml	25ml	PS	○	5枚包装	200	¥28,940	¥15,900	¥79.5
J960305-SIN	試薬リザーバー 50ml	50ml	PS	○	個別包装	100	¥22,370	¥12,300	¥123.0
J960305	試薬リザーバー 50ml	50ml	PS	○	5枚包装	200	¥30,220	¥16,600	¥83.0
J961305-SIN	試薬リザーバー 100ml	100ml	PS	○	個別包装	100	¥24,700	¥13,580	¥135.8
J961305	試薬リザーバー 100ml	100ml	PS	○	5枚包装	200	¥31,700	¥17,420	¥87.1

## グライナー UV スタンド

### 回転ピペットスタンド UV ランプ付き



使用方法は  
YouTubeで  
ご確認頂け  
ます。

6本のピペットを整理でき、さらに99%のコンタミネーションを防ぐことができる世界初のピペットスタンドです。  
この新しいUVスタンドは254nm UVライトにピペットシャフトを完全に照射することのできる高効率リフレクター/コンセントレイターを用いています。  
この照射により好ましくない汚染菌を分解し、PCRや他の感受性の高い手順におけるクロスコンタミネーションを防ぎます。  
主なピペットメーカーのシングルチャンネルピペットをUVスタンドの中に置くだけで、28分間で自動的に除菌できます。  
DNA分解能力を有するUV-Cにピペットシャフトを360°照射することで、クリーンなピペットに仕上げます。

キャパシティー	6本立て 主なピペットメーカーへ適応 0.2 µl -1000 µl 各機種
ランプ	254nm, 殺菌能力の高いUV-C 放射 ロングライフ水銀ランプ(2,000時間)
サイクルタイム	28分間で自動的に作業終了
外装素材	UV耐性ポリカーボネイト
リフレクター (反射鏡)	鏡面、アルミニウムコート、ポリエステルフィルム
サイズ	直径17cm, 高さ33cm
電源	100V-240V, 50/60Hz, 1A

**世界発!  
UVスタンド!**

製品番号	製品名	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
J804801	回転ピペットスタンド UVランプ付き	¥69,960	¥59,000



# キャンペーン J0901 専用注文書

## FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2024年9月2日～2024年12月27日

製品番号	製品名	キャンペーン価格(税抜)	ご発注数
J804001-C	EzDrop-1000C	¥1,330,000	
J804305	グラジェントターボサイクラー2	¥540,000	
J804391	Wi-Fiアップグレードモジュール	¥0*	
J804306	ターボサイクラーライト	¥418,000	
J842050-N	マイクロ遠心機5D	¥83,000	
J843050	卓上ミニ遠心機	¥34,600	

\* グラジェントターボサイクラー2(製品番号：J804305)を1台ご注文で本品1台が無償になります。

製品番号	製品名	キャンペーン価格(税抜)	ご発注数
サファイアPCR 8連チューブ			
673210	本体のみ	¥8,580	
373250	フタのみ(フラットトップ)	¥3,590	
373270	フタのみ(ラウンドトップ)	¥2,450	
サファイアPCR 96ウェルプレート			
652250	スカートなし ユニバーサル	¥48,500	
652260	ハーフスカート ABI用	¥43,000	
652270	フルスカート	¥56,000	
652290	ハーフスカート ABI用	¥34,000	
2ポジションキャップチューブ			
115262	5ml	¥51,200	
187262	14ml	¥41,360	

製品番号	製品名	キャンペーン価格(税抜)	ご発注数
Sapphire Pipettor マルチチャンネル			
89000810	0.5-10 $\mu$ L	¥58,000	
89000820	2-20 $\mu$ L	¥58,000	
89008200	20-200 $\mu$ L	¥58,000	
89008300	20-300 $\mu$ L	¥58,000	
89001210	0.5-10 $\mu$ L	¥66,000	
89001220	2-20 $\mu$ L	¥66,000	
89012200	20-200 $\mu$ L	¥66,000	
89012300	20-300 $\mu$ L	¥66,000	

製品番号	製品名	キャンペーン価格(税抜)	ご発注数
リザーバー			
J908305-SIN	10mL	¥12,300	
J908305	10mL	¥15,900	
J909305-SIN	25mL	¥12,300	
J909305	25mL	¥15,900	
J960305-SIN	50mL	¥12,300	
J960305	50mL	¥16,600	
J961305-SIN	100mL	¥13,580	
J961305	100mL	¥17,420	

製品番号	キャンペーン価格(税抜)	ご発注数
回転ピペットスタンド UV ランプ付き		
J804801	¥59,000	

### 販売店様へお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外のご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用への変更はお断りさせていただきます。また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。ご理解賜ります様よろしくお願いいたします。

### ● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

### ● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

## 株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区神田1-14-10 PMO内神田ビル

TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546

URL [https://www.gbo.com/ja\\_JP.html](https://www.gbo.com/ja_JP.html)

グライナー・ジャパン取扱店

### ■ お願いおよび注意事項

【価格】記載の価格は2024年9月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。記載の価格には消費税は含まれておりません。  
【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

Document Number 202409001