

はじめまして！いつも大変お世話になっております。株式会社グライナー・ジャパンです。
この度、御愛顧いただいておりますバキューット真空採血管や微量採血容器Mini Collect II、新製品のご紹介や社内での出来事など、盛りだくさんな情報をいち早く皆様にお伝えたくニュースターの発行を開始いたしました！！(*^-^*)
お手隙の際にご一読いただけますと大変光栄です！宜しくお願いいたします。


Topic 01 高速凝固管の採用施設アップ！現場でTATの短縮を求められ

弊社では、バキューット採血管トロンビン入りのお取り扱いがございます。
通常の生化学管と比較し、添加剤トロンビンの機能により採血実施後の凝固時間が通常15分→5分まで短縮され、より迅速な検査や治療の開始に繋がります。日々検査に追われている外来や緊急外来では、TAT(検査受付から検査終了までの所要時間)の短縮が急務になり、トロンビン入りの採血管(高速凝固管)の需要が大幅に伸びていると考えられます。



製品番号	血液採取量	キャップカラー	リングカラー	チューブタイプ	サイズ	ラベル	受注発注
454592	3.5 ml	オレンジ	イエロー	PREMIUM	13 x 75	紙	○
476309JP	5 ml	オレンジ	イエロー	PREMIUM	13 x 100	透明	

*PREMIUMタイプはねじ型のツイストキャップとなっています。



編集者
日置 愛梨

皆様、初めまして！広報誌の編集を担当しています日置と申します。看護師としての経験を活かし、技術担当として2023年にグライナー・ジャパンに入社し、現在は代理店様向けに製品勉強会や、不具合発生時の対応をさせて頂いております。これから弊社製品の最新情報や、お忙しい皆様の息抜きになるようなコラムを考えていきますので宜しくお願いいたします◎

Topic 02 新製品TiPOsの反響は...


2024年 展示会にTiPOsを設置しました！



2024年、今年も数多くの展示会に参加させて頂きました。中でも今年初めてローンチした採血管準備装置 "TiPOs" にはたくさんのご関心をいただきました(^_^)♪
TiPOsは、8管種最大200本収容できる10インチ液晶パネル内蔵で業界最小の小型採血管準備装置です。スペースの限られる医療機関で大活躍する製品です！

Topic 03 大きな反響 Mini Collect II

グライナー・ジャパンの主力製品 "Mini Collect II" に皆様のご尽力でたくさんの反響をいただきました。製品に関するお問い合わせやサンプル依頼など、いつもありがとうございます！
通常の採血量の1/10で検査を可能にする本製品は、新生児や患児様への採血に加え採血の困難な患者様にも安心してご使用頂けます。動物研究施設様や、企業メーカー様にもご好評いただいております。大変光栄です！！(*^-^*)
多岐に渡る使用用途の微量採血管Mini Collect IIを来年もよろしくお願いたします。

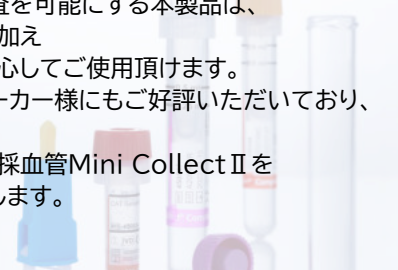

Topic 04 医療安全、感染対策の観点から血液分注ユニットの需要向上

シリンジ採血を行う際に用いられる血液分注用安全器材。弊社でもBTU(血液分注ユニット)のお取り扱いがございます。先日、透析学会の展示会に本製品を展示したところ、たくさんのサンプル依頼をいただきました。透析を受けられる患者様の多くが、週2回ほど経過観察のため採血が行われ、その際血液回路のポートからシリンジを介し採血が行われることがあるそうです。直針での分注は針刺し事故が発生するリスクが高く危険です。多忙な医療従事者の安全と健康を守るため、標準採血法ガイドラインでも推奨されている本製品BTUの使用を来年も進めて参ります！！



2024 12



SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

NOTE

PREMIUM採血管

開栓時



1
キャップを半回転
ひねり開栓します。

2
力をかけず、ゆっくり
開栓することで血液
暴露を防止します。

閉栓時



3
チューブのねじ山と
キャップが噛み合い、
しっかり閉栓され、
検体の漏れを防ぎ
ます。
そのため安全に検体
を輸送できます。